

# GALVANIC


## *System II*

Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ

ระบบที่ช่วยฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ของคุณ  
เผยผิวที่เปล่งประกาย

ระบบที่ **ฉลาด** **ง่าย** และมี**หลักฐานการทำงาน**  
**ได้ทางวิทยาศาสตร์** จะตอบโจทย์ใน  
กิจวัตรประจำวันของคุณที่บ้าน

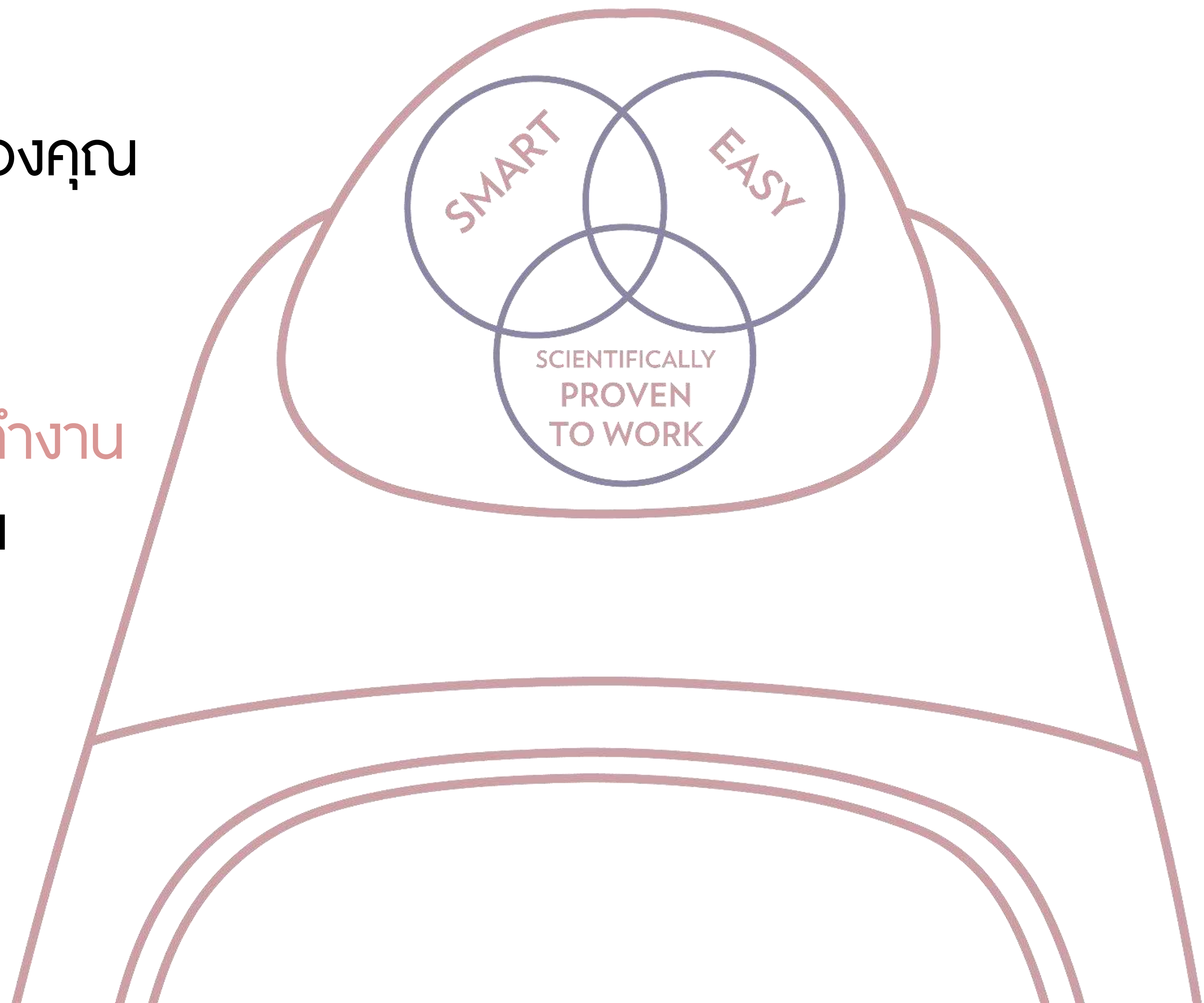





Presenting our *most powerful, comprehensive*

# GALVANIC

## System II

หนึ่งใน At-Home Beauty Device System Brand อันดับหนึ่งของโลกในปี 2017 & 2018\*

ที่มา บริษัท Euromonitor International จำกัด นิยามของ Retail Value RSP ทุกช่องทาง 2017 และ 2018 รวมถึง at-home Skin Care Devices ควบคู่กับการใช้งานเฉพาะของแบรนด์เดียวกัน อ้างอิงตามกระบวนการวิจัยของ Euromonitor ในเดือนมกราคม/กุมภาพันธ์ 2019 รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าด้วยอัลตราโซนิกที่อิงตามฐานข้อมูล Passport ไม่รวมเครื่องมือบำรุงผิว/ ทำจัดขน เครื่องโกนขน หรือเครื่องมือดูแลช่องปาก

Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ



# THE EVOLUTION OF NU SKIN TECHNOLOGY

For more than 30 years, we've been helping people look, feel, and live younger. Along the way, we've developed several state-of-the-art devices to help promote a more youthful appearance and encourage a healthy lifestyle.

2008

## Galvanic Spa System II

The Galvanic Spa System II offered more flexibility and customization than the previous version, with interchangeable heads for face, scalp, and body. It also allowed you to choose the length of time and charge of each treatment.



2001

## Nu Skin Galvanic Spa System

Our revolutionary Galvanic Spa System allowed you to experience a revitalizing spa-like treatment in your own home. Using galvanic current to stimulate the skin, the Spa helped deep cleanse and nourish the skin, promoting natural radiance and restoring vitality.



Internal Use Only

2010

## Galvanic Spa System II ageLOC Edition

The ageLOC Edition Galvanic Spa System II features a proprietary ageLOC Face Conductor, delivering five times more ageLOC ingredients to the skin when used with the Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC. It also includes a larger, brighter display, more intuitive usability, and advanced ergonomics.



#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ



— meet...



อุปกรณ์ความงามส่วนตัวในบ้านของคุณ เติมเปี่ยม  
ด้วยคุณประโยชน์ที่ช่วยฟื้นฟูบริเวณใบหน้า ลำตัว และ  
หนังศีรษะ ตามที่คุณต้องการ

นวัตกรรมของกระแสไฟฟ้าที่มีประจุ เพื่อเร่งการผลึก  
ส่วนผสมที่สำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน รวดเร็วขึ้น  
ซึ่งพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์

มาพร้อมกับอินเตอร์เฟสใหม่ที่ยาง่ายสำหรับผู้ใช้งาน ด้วย  
การแสดงผลแบบ LED พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมที่ถอด  
เปลี่ยนได้ เพื่อสร้างความงามตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

นวัตกรรมใหม่ที่ชาญฉลาดและมีขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย ในมือเดียว!

ทำไมคุณถึงชอบสิ่งนี้



**ใบหน้า** คืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวอย่างเห็นได้ชัดและขจัด  
สิ่งสกปรก ทำให้ผิวสดชื่น ชุ่มชื้น เพื่อฟื้นฟู ทำให้ผิวเต่งตึง  
ช่วยลดการเกิดร่องลึกและริ้วรอย

**ลำตัว** ช่วยให้ผิวโดยรวมเรียบเนียนและลดการเกิดชั้นของ  
ไขมันตามร่างกาย

**หนังศีรษะ** ช่วยบำรุง ฟื้นฟูสภาพหนังศีรษะเพื่อช่วยให้ผม  
งอกขึ้น แข็งแรงขึ้น และมีสุขภาพดี

*\*รักษาโดยวิธีการเตรียมการบำรุงอย่างล้ำลึกช่วยฟื้นฟูผมเสีย*



# NEW USER INTERFACE DESIGN



ถูกออกแบบใหม่เป็น



จุดบอกเวลา (นาฬิกา)



หมายเลขปรับระดับการทำงาน

ปุ่มเลือก



สัญลักษณ์น้ำพุเพิ่มพีอีทา

# SINGLE DEVICE, MULTIPLE USES
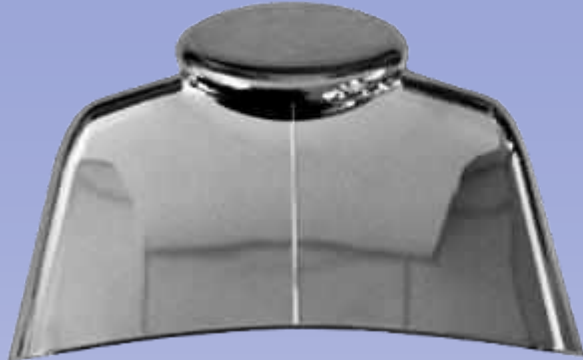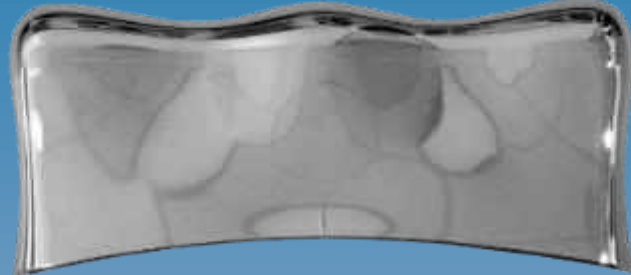
| YOUR CONCERN                                          | FACE                                                                                                                                                                                                                                                | LINES & EYES                                                                                                                                                                                                                                                    | BODY                                                                                                                | SCALP & HAIR                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>USE</p> <p>GALVANIC<br/><i>System II</i></p> <hr/> |  <p>Face<br/>CONDUCTOR</p> <hr/>                                                                                                                                   |  <p>Spot<br/>CONDUCTOR</p> <hr/>                                                                                                                                             |  <p>Body<br/>CONDUCTOR</p> <hr/> |  <p>Scalp<br/>CONDUCTOR</p> <hr/>                            |
| <p>PAIR WITH</p>                                      |  <p>ageLOC<br/>Galvanic Spa<br/>Facial Gels</p>  <p>ageLOC<br/>PowerMask</p> |  <p>Tru Face<br/>Line<br/>Corrector</p>  <p>ageLOC<br/>Galvanic Spa<br/>EnergEyes</p> |  <p>ageLOC<br/>Body Gel</p>     |  <p>ageLOC Nutriol<br/>Intensive Scalp &amp; Hair Serum</p> |

Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ



For Face





# GALVANIC SPA®


## Facial Gels

ฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้า สิวที่ชุ่มขึ้น นุ่ม สะอาด และสดชื่น ด้วย 2 ขั้นตอน  
ง่ายๆ เริ่มต้นด้วย pre-treat gel เพื่อขจัดสิ่งสกปรก สู่ขั้นตอนในการดึงสิ่ง  
สกปรกที่มาจาก การ pre-treat และผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ของ ageLOC เข้า  
ไปในผิวแทนด้วย treatment gel

2 ขั้นตอนเพื่อขจัดสิ่งสกปรก และฟื้นฟูผิวที่อ่อนล้าใน 5-10 นาที




## GALVANIC ACTION PRE-TREAT

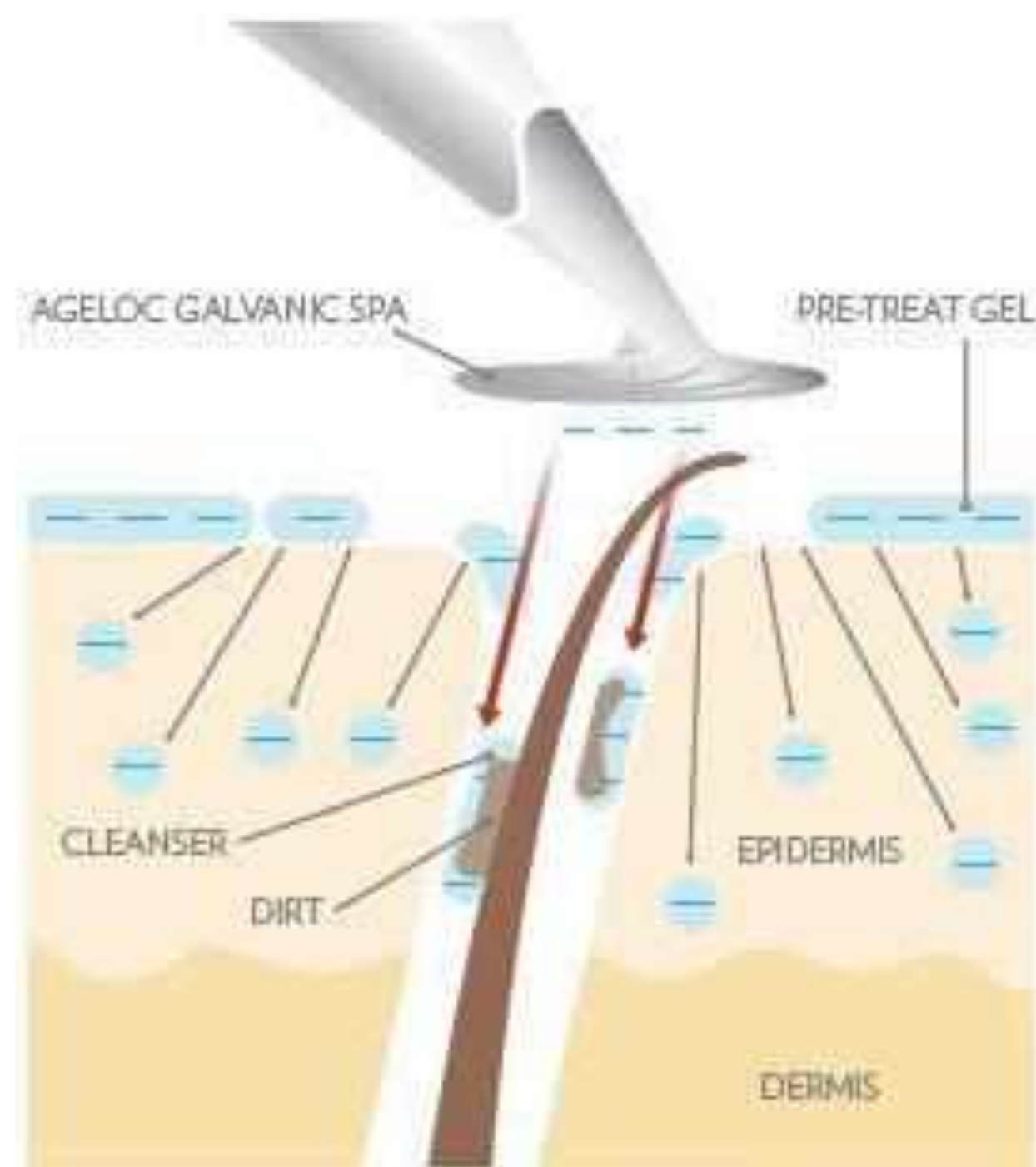

- ในช่วงกระบวนการเตรียมการทำงานของเครื่อง Galvanic และ Pre-treat Gel เป็นประจุลบ
- ประจุลบเหล่านี้จะไล่กันเอง และผลัก Pre-treat Gel เข้าสู่ผิว
- Pre-treat Gel จะรวมสิ่งสกปรกในผิวเข้าด้วยกัน

## GALVANIC ACTION TREATMENT

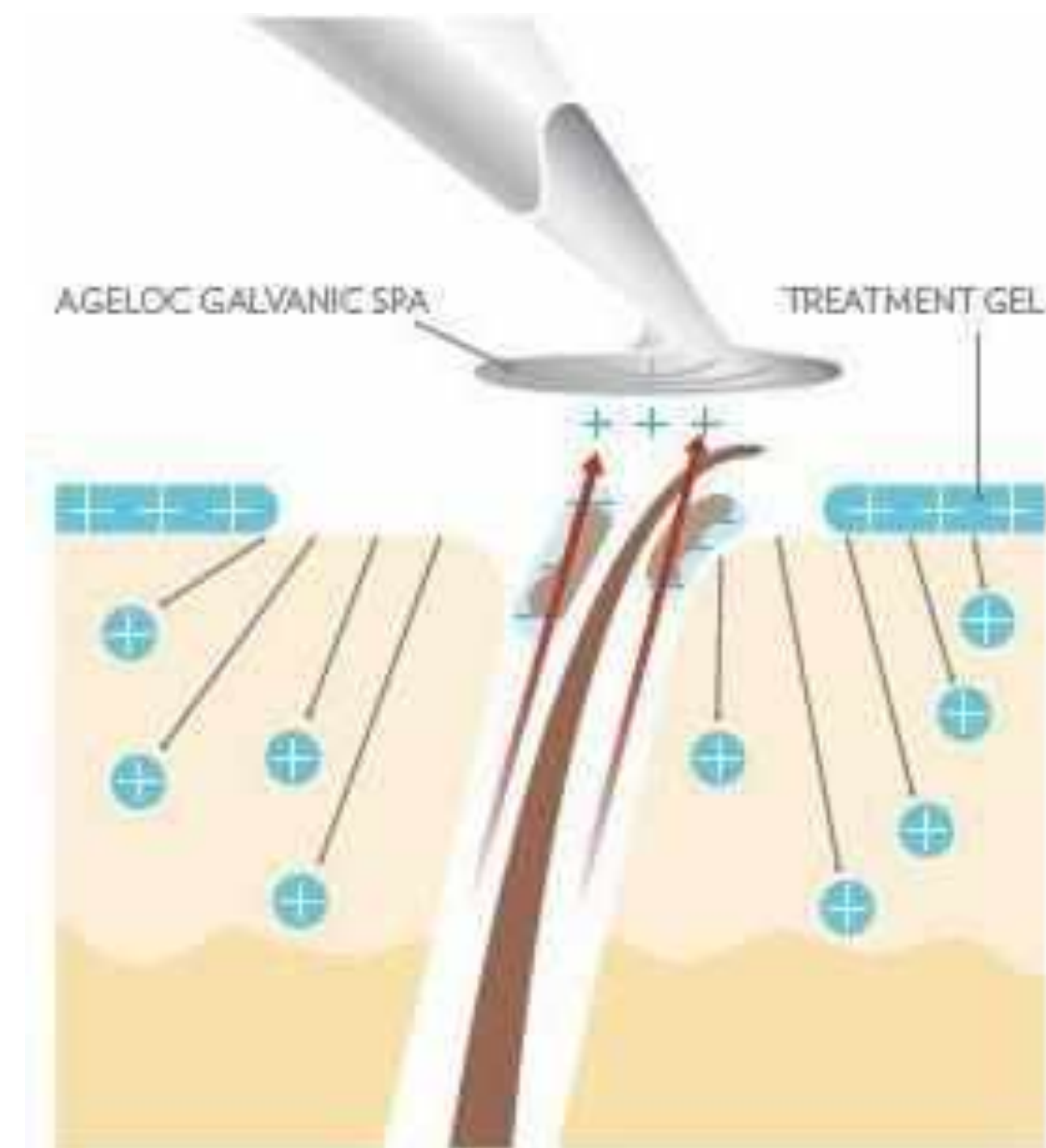

- เครื่อง Galvanic และ Treatment Gel เป็นประจุบวก
- ประจุบวกเหล่านี้จะไล่กันเองเพื่อช่วยผลักส่วนผสมที่มีประโยชน์เข้าสู่ผิว โดยรวมเฉพาะส่วนผสมของ ageLOC เข้าด้วยกัน
- อุปกรณ์ประจุบวกช่วยดึงสิ่งสกปรกที่มีประจุลบที่ค้างอยู่จากกระบวนการ pre-treat ด้วยการดึงสิ่งเหล่านี้ออกจากผิว



# HOW TO USE

ageLOC  
PRE-TREAT GEL



USE FACE CONDUCTOR

AT SETTING #1



CURRENT



NEW



ageLOC  
TREATMENT GEL



USE FACE CONDUCTOR

AT SETTING #2



CURRENT



NEW





# NEW USER INTERFACE

ศึกษาจากการทำงานด้วยตัวเอง

- 94.3% เห็นด้วยว่าใช้งานง่าย
- 100% เห็นด้วยว่าอุปกรณ์จับง่าย
- 97.1% เห็นด้วยว่าการแสดงผลเข้าใจง่าย/ ประมวลผลรวดเร็ว
- 97.1% เห็นด้วยว่าการแสดงผลดูทันสมัย น่าดึงดูด





Internal Use Only

# PowerMask

เพิ่มความชุ่มชื้นสู่ผิวด้วย PowerMask ผลิตภัณฑ์อันล้ำสมัย  
เพื่อให้ผิวกุณสดชื่น ชุ่มชื้น และฟื้นฟูและทำให้ผิวดูเต่งตึง

แผ่นมาร์กส ที่ทำจากไบโอเซลลูโลส เพื่อให้ความชุ่มชื้นสูงสุด  
บรรจุด้วยสารที่มีประจุ เมื่อจับคู่กับกระแสของ Galvanic system II  
จะรวมตัวกันเพื่อส่งต่อความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณ

*ผิวชุ่มชื้นและเต่งตึงในทันที ผู้ใช้รับรู้ว่ามีผิวดีขึ้น มีความชุ่มชื้น เรียบเนียน และ  
กระจ่างใส ผู้ใช้มากกว่า 90% รู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้น เรียบเนียนมากขึ้น อ่อนนุ่มขึ้น  
เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวมากขึ้นถึง 40% ด้วยการใช้งาน 1 ครั้ง ปรับผิวให้เต่ง  
ตึงประมาณ 30% ด้วยการใช้งาน 1 ครั้ง*

NowYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ



## SKIN TEMPERATURE STUDY

จากการศึกษาอุณหภูมิของผิว พบว่า PowerMask มีผลทำให้  
ผิวเย็นและลดอุณหภูมิของผิวลง 5%

ผู้ใช้สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

100% เห็นด้วยว่าผิวของพวกเขารู้สึกเย็นลงทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์

100% เห็นด้วยว่าผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวเย็น

100% เห็นด้วยว่าผิวของพวกเขารู้สึกอ่อนเยาว์หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์



# CORNEOMETER HYDRATION MAPPING

จากการศึกษา โดยใช้สีแทนระดับของความชุ่มชื้นในผิว


การปรับความชุ่มชื้นของผิวบนใบหน้านี้ได้ถูกนำมาทดลองใช้กับผู้ทดสอบหลังจากการใช้ 1 ครั้ง

27% พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบริเวณหน้าผาก

25% พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบริเวณตา

40% พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบริเวณแก้ม

29% พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบริเวณขากรรไกร

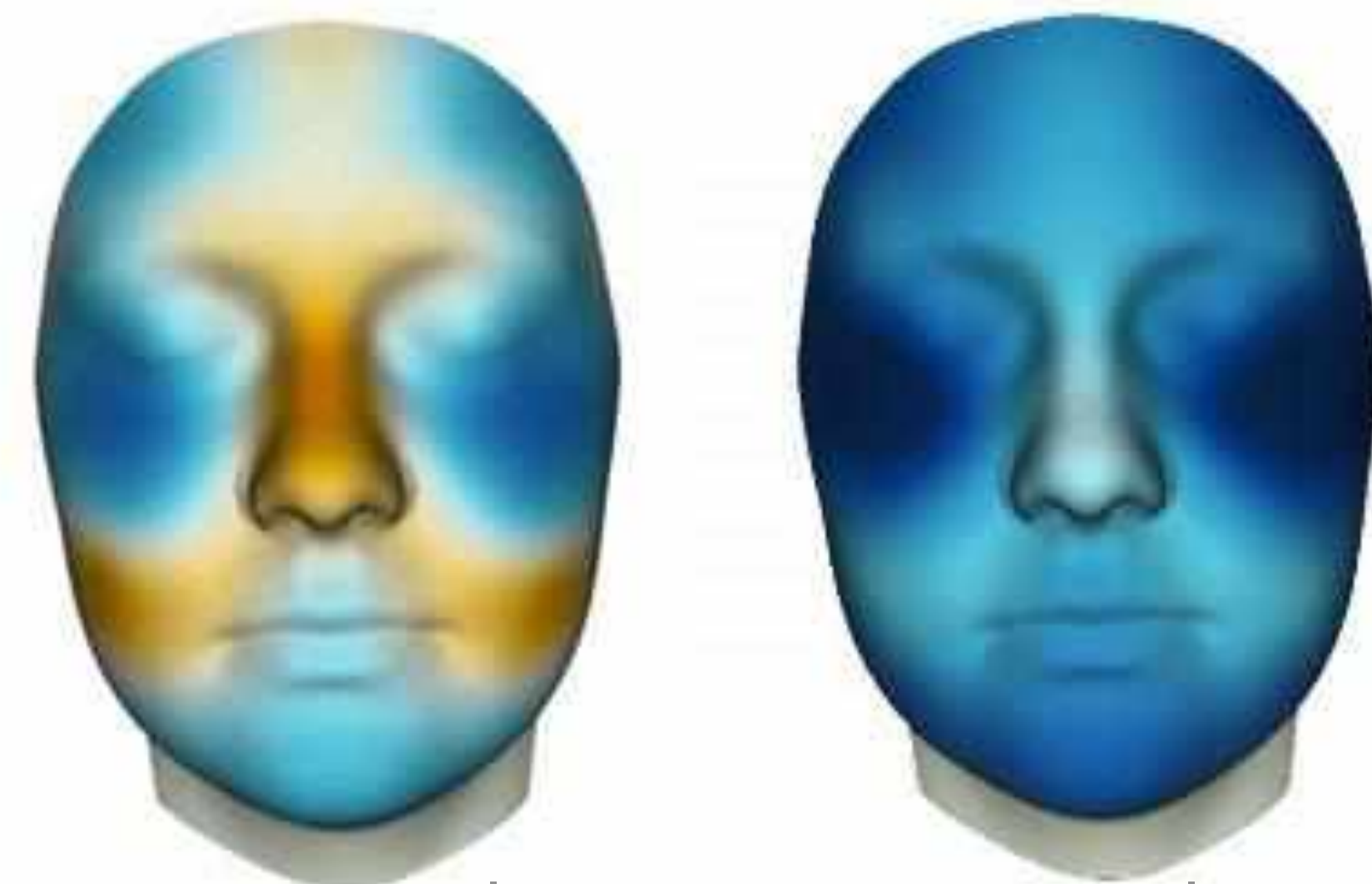

สีฟ้า = สภาพผิวที่ดี สีเหลือง = สภาพผิวที่บกพร่อง



# HOW TO USE

PowerMask



USE FACE CONDUCTOR

AT SETTING #5



OR

USE FACE CONDUCTOR

AT SETTING #4

MORE INTENSIVE



CURRENT

NEW




CURRENT

NEW





For Lines

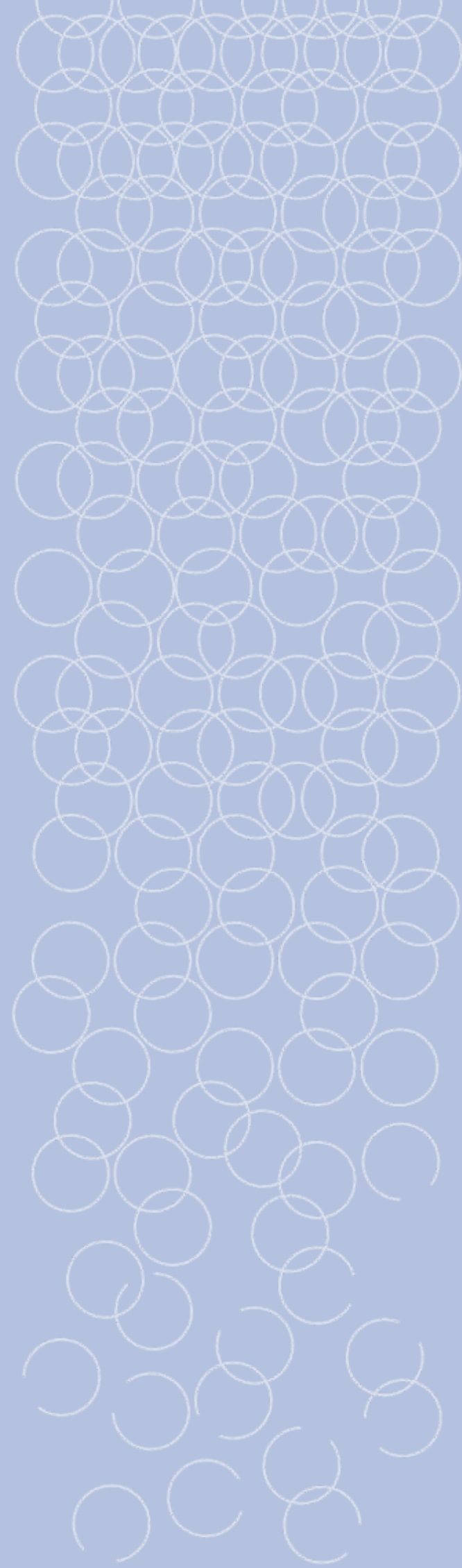

Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ



# TRU FACE® *Line Corrector*

ตั้งเป้าไปที่สัญญาณของอายุที่เพิ่มขึ้น ด้วยเปปไทด์ที่  
ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยรอบปาก ตา และหน้าผาก  
ส่วนผสมที่ช่วยให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์ สุขภาพดี และเรียบ  
เนียน พร้อมโบกมือลาให้กับการเกิดร่องลึกและริ้วรอย

ลดการเกิดร่องลึกและริ้วรอย

ทำให้ผิวเรียบและฟื้นฟูผิวใหม่อย่างชัดเจน

พิสูจน์ได้ทางคลินิกเพื่อแก้ไขการเกิดร่องลึก รอยตีนกา

Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ



# HOW TO USE

Tru Face Line Corrector



USE SPOT CONDUCTOR

AT SETTING #3



CURRENT



NEW







# For Scalp AND HAIR

 ageLOC®

Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ



ageLOC® NUTRIOL®

## Intensive Scalp & Hair Serum

สูตรปราศจากไขมันและไม่ต้องล้างออก จะช่วยฟื้นฟูสภาพของหนังศีรษะในแต่ละวัน และทำให้เส้นผมหลุดร่วง สามารถใช้ได้ทุกเช้าและเย็น เพื่อให้สารอาหารกับเส้นผมของคุณ

พิสูจน์ได้ทางคลินิกเพื่อปรับความหนา ปริมาณ ความเงางาม และความนุ่มของเส้นผม\*

ปริมาณและความนุ่มของเส้นผมดีขึ้นมากกว่า 100% ใน 6 เดือนจากการศึกษาทางคลินิก\*

มากกว่า 90% ของผู้ใช้รู้สึกว่าการหลุดร่วงของเส้นผมดีขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น \*

ผลลัพธ์อ้างอิงจากการใช้ ageLOC Nutriol Intensive Scalp & Hair Serum กับ Galvanic Spa, ageLOC Nutriol Scalp & Hair Shampoo, ageLOC Nutriol Scalp & Hair Conditioner

Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ





# HOW TO USE

ageLOC Nutriol  
Intensive Scalp & Hair Serum



USE SCALP CONDUCTOR

AT SETTING #5



CURRENT

NEW




Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ





## วิธีใช้

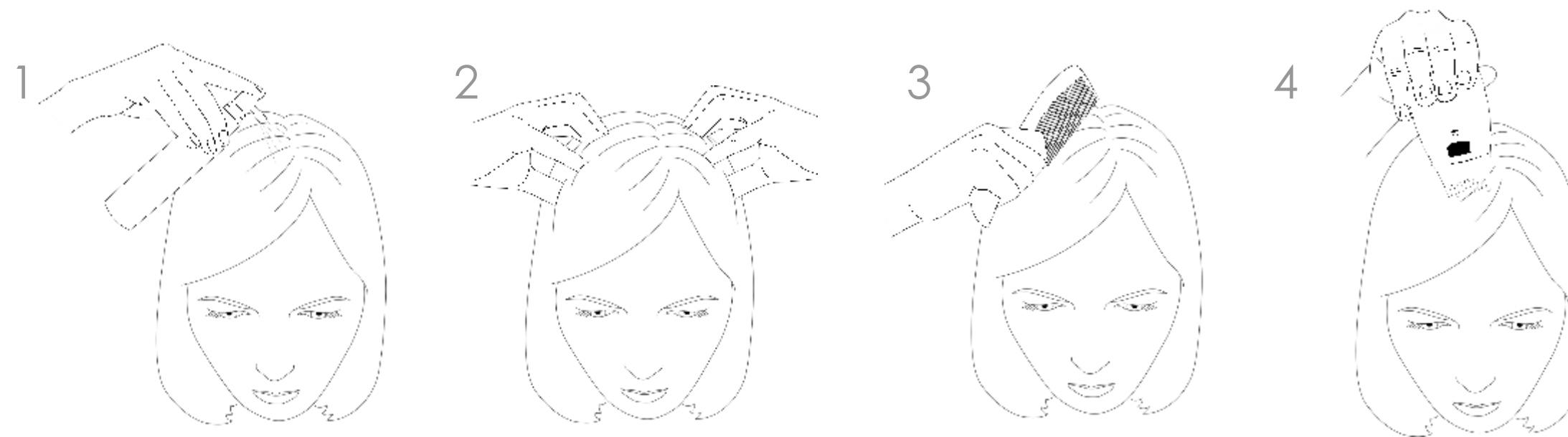

ชโลมเซรั่มให้ทั่วเส้นผมที่แห้งหรือหมาดๆ เน้นที่บริเวณหนังศีรษะและรากผม

ใช้นิ้วมือนวดเบาๆ เพื่อให้เซรั่มค่อยๆ ซึมเข้าสู่หนังศีรษะ

ใช้เครื่องกลวนนิก ซีเอสเต็ม II เป็นเวลา 2 นาที โดยใช้หัวสัมผัสสำหรับใช้กับหนังศีรษะ และเลือกเซตที่เบอร์ 5 ใช้มือจับเครื่อง โดยให้เครื่องสัมผัสกับหนังศีรษะโดยตรง ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปตามบริเวณไรผมด้านหน้าไปจนจรดโคนผมบริเวณท้ายทอย โดยที่อุปกรณ์ยังคงสัมผัสกับหนังศีรษะตลอดเวลาที่มีการเลื่อนอุปกรณ์

ไม่ต้องล้างออก สามารถจัดแต่งทรงผมได้ตามปกติ

หัวสัมผัสสำหรับใช้กับหนังศีรษะ

ตั้งเซตไว้ที่#5



นาที

Tip: ใช้เองคือค บุนรียออล อินเทนซีฟ สคัลป์ & แฮร์ เซรั่ม วันละ 2 ครั้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น





# NEW SCALP CONDUCTOR SELF-PERCEPTION STUDY

## หลังจากใช้ครั้งแรก

85.7% รู้สึกว่าอุปกรณ์จับง่าย ถนัดมือ

77.1% รู้สึกว่าอุปกรณ์ใช้นวดหนังศีรษะได้ดี

74.3% รู้สึกว่าอุปกรณ์เข้ากับหนังศีรษะได้ดี

71.4% รู้สึกว่าอุปกรณ์สั่นไหลบนหนังศีรษะได้ดี

## หลังจากใช้ 2 สัปดาห์

80.0% รู้สึกว่าอุปกรณ์ช่วยนวดหนังศีรษะ

71.4% รู้สึกว่าทำเป็นประจำวันละ 2 ครั้ง สามารถทำได้ง่าย

68.6% รู้สึกว่าเส้นผมมีสภาพดีขึ้น

68.6% รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ดีกับเส้นผมของเขา

68.6% รู้สึกว่าผมนุ่มขึ้น

62.9% รู้สึกว่าอุปกรณ์ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา





For Body



Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ







# ageLOC® Body Gel

เพื่อให้คุณรู้สึกมีรูปร่าง กระชับ เรียบเนียนมากขึ้น ageLOC Body Gel เป็นสูตรที่ทำงานร่วมกับ Galvanic Spa โดยเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการดูแลผิวกาย

ผ่อนคลายไปกับประสบการณ์ที่คล้ายกับสปาที่อ่อนโยน และช่วยดูแลผิวโดยรวม ช่วยให้ผิวบริสุทธิ์และสดชื่น ในขณะที่ช่วยลดสัญญาณของความมีอายุอย่างเห็นได้ชัด

ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับกระแสกลวานิก เพื่อลดการเกิดเซลล์ไขมัน ช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนเพื่อให้ดูมีรูปร่างที่ดีมากขึ้น และช่วยกระชับผิว เพื่อให้ดูอ่อนเยาว์มากขึ้น



# HOW TO USE

USE BODY CONDUCTOR

AT SETTING #4



ageLOC Body Gel



CURRENT

NEW



Internal Use Only

#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ





# LIMITED ITEMS 10-17 ก.พ. 2563

ONLINE  
ONLY

สำหรับตำแหน่งแบรนด์ เรพรีเซนต์เททัฟ ขึ้นไปเท่านั้น (จำนวนจำกัด 5 ชุด/ท่าน)

NEW  
PRODUCT



FREE

กัลวานิก สปา เฟเชียล เจล  
สูตรเอจล็อก 3 กล่อง  
(จำนวนจำกัด)



## ชุดพิเศษ กัลวานิก คิต (เครื่องใหม่)

- 1 ชุด ประกอบด้วย • เครื่องกัลวานิก ซีเอสเอ็ม II พร้อมหัวเปลี่ยน 4 หัว (เครื่องใหม่)  
• กัลวานิก สปา เฟเชียล เจล สูตรเอจล็อก 2 กล่อง  
• เอ็นเอพีซีเอ มอยซ์เจอร์ มีส์ 1 ขวด • เอจล็อก พาวเวอร์มาร์สค 1 กล่อง

ราคาสมาชิก

12,900.-

250

ราคาขายปลีก

13,900.-


PV



# ชุดผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

1-29 ก.พ. 63  
(จำนวนจำกัด)

**OUTSIDE-IN** สวยจากภายนอกสู่ภายใน

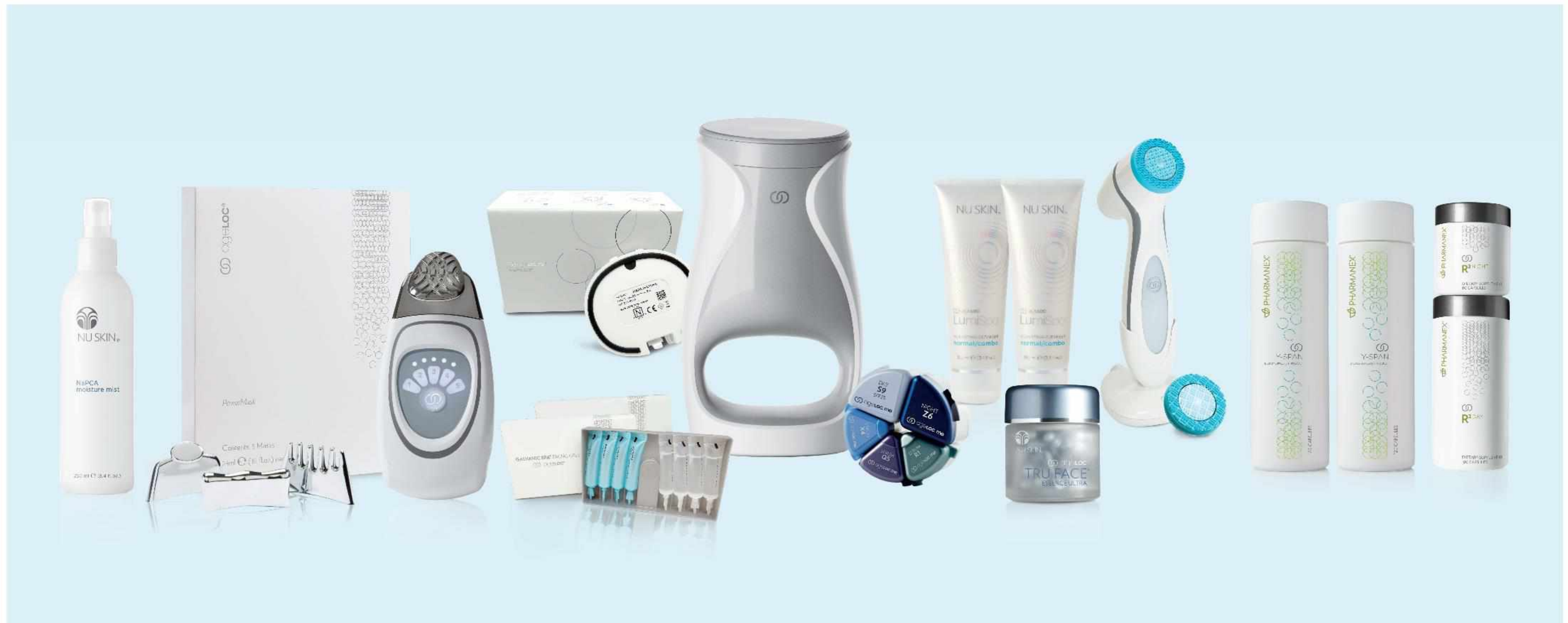



# Preview Promotion

โปรโมชั่นพิเศษ 10 - 17 ก.พ.

ซื้อ นู สกิน กัลวานิก ซีรีส์ II 1 ชุด,  
**รับฟรี!** สปา เฟเชียล เจล วิก เอจลิ่ง 3 กล่อง  
(สำหรับ BR ขึ้นไป, จำกัดสิทธิ์คนละ 5 ชุด)



Free!

ONLINE  
ONLY



**พิเศษ! ต่อที่ 2...**นำใบเสร็จมาร่วมสนุกโยนลูกเต๋า  
ลุ้นรับ เอ็นเอ พีซีเอ มิส หรือ จีเอ็มเอ็ม  
(จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด/ 1 สิทธิ์)

**พิเศษ! ต่อที่ 3...**นำใบเสร็จมาทำ Workshop ร่วมกับเราได้ที่ TE Lounge โดย PBC  
(จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด/ Workshop 1 ครั้ง)



#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ ❤️



# Workshop at TE Lounge by PBC

19, 26 กุมภาพันธ์ และ 11, 25 มีนาคม

เวลา 16.00/ 18.00 (จำนวนจำกัด)

## เงื่อนไขในการรับสิทธิ์

- ซื้อ นู สกิน กัลวานิก ซีเอสเต็ม II ขึ้นต่ำ 1 ชุด ในช่วงพีรวิว โปรโมชั่น (10-17 กุมภาพันธ์)
- จำกัดสิทธิ์ 1 ชุด/ การทำ workshop 1 ครั้ง  
(ในกรณีซื้อ 5 ชุด/ 1 ใบเสร็จ สามารถเข้ารับบริการได้ 5 ครั้ง)
- ต้องนำใบเสร็จมาแสดงหลักฐานในวันเข้ามารับบริการ
- เนื่องจากแต่ละรอบสามารถรับผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปได้จำนวนจำกัด กรุณาโทรมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่เบอร์ 02-791-8548
- กรุณานำเครื่อง GV II ของท่านมาด้วย ในวันที่มารับบริการ
- สามารถใช้ได้ทั้ง ศูนย์ฯ นูสกิน จามจุรี เท่านั้น





# Brand Affiliate Tools

เริ่มใช้งานได้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง

1. LINE@ Nu Skin Thailand
2. GV II Microsite
3. Nu Skin Thailand Website
4. Nu Skin Thailand Facebook

ข้อมูลที่จะได้รับ

1. รายละเอียดสินค้า
2. รูปภาพสำหรับการแชร
3. วิดีโอ GV II
4. แผ่นพับ GV II ที่บรรจุอยู่ในชุดฝึก GV II





# Brand Affiliate Tools

## วิธีการเข้าใช้งาน GV II Microsite


เริ่มใช้งานได้วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2563



1. GV II Microsite โดยคลิกตามลิงค์ทางด้านล่าง

[https://www.nuskin.com/content/nuskin/th\\_TH/products/nu\\_skin/ageloc\\_galvanic\\_spa.html](https://www.nuskin.com/content/nuskin/th_TH/products/nu_skin/ageloc_galvanic_spa.html)

2. Nu Skin Thailand Website  
โดยคลิกที่แบนเนอร์ GV II

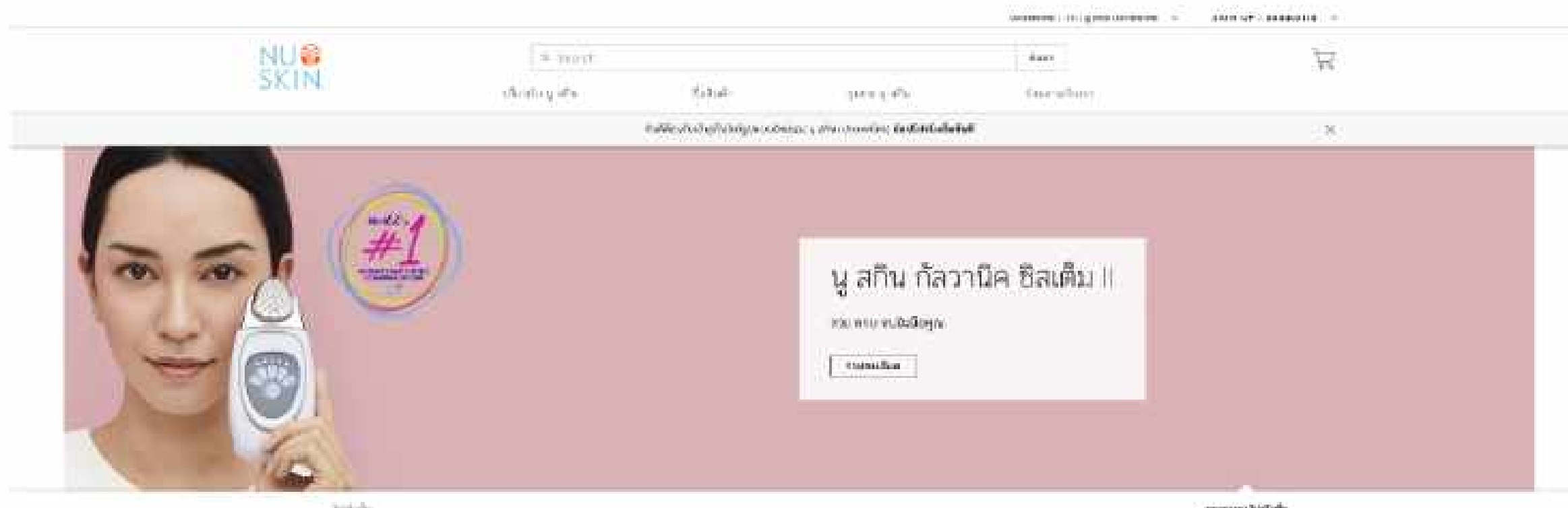

3. LINE@ Nu Skin Thailand  
โดยกดที่รูปเครื่อง GV II



#howYOUNGareyou #NuSkinGalvanic2 #สวยครบจบในมือคุณ ❤️

# Brand Affiliate Tools

## วิธีการเข้าดาวน์โหลดรูปภาพที่ LINE@ Nu Skin Thailand

โดยกดที่สัญลักษณ์ “คลังรูปภาพ”

แล้วเลือกแฟ้ม “นู สกิน กัลวานิก ซีสเต็ม II”

