


ageLOC™
boost
BRUGERMANUAL

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLD	3
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER	4
FØR DU BEGYNDER	6
OPLADNING AF DIT AGELOC BOOST-APPARAT	6
BRUGERVEJLEDNING	8
RENGØRING OG PLEJE AF DIT AGELOC BOOST-APPARAT	12
FEJLFINDING	13
BORTSKAFFELSE AF APPARAT	13
VEDLIGEHOLDELSE	14
ERSTATNINGS- OG GARANTIINFORMATION	15
PATENTER	15
SYMBOLDEFINITIONER	15

INDHOLD

- 1 ageLOC Boost-apparat
- 1 Opstartsguide
- 1 Magnetisk oplader
- 1 Beskyttelsescover til ledende overflade
- ageLOC Boost Activating Serum, udviklet til anvendelse sammen med ageLOC Boost-apparatet, sælges separat.

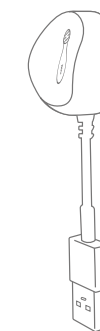













SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

ageLOC Boost og den magnetiske oplader er testet ved tryk, der svarer til 4000 meters højde.

Anordningen indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.

 **ADVARSEL:** Anvend kun den magnetiske oplader, som apparatet er forsynet med.

-  ageLOC Boost-apparatet er kun til brug på sund hud. Anvend ikke apparatet, hvis du har åbne sår, er disponeret for rosacea, har metalallergi, eller hvis du har problematisk eller meget sensitiv hud. Konsultér din læge, før anvendelse, hvis du er gravid, har en pacemaker eller lignende anordning, lider af epilepsi, har metalbøjler på tænderne, har et metalimplantat eller i tilfælde af sygdom.
-  ageLOC Boost er udviklet til voksne. Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og viden, samt børn over 16 år må bruge apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i at bruge apparatet sikkert, så de forstår de involverede farer. Opbevares uden for børns rækkevidde. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.
-  Må ikke anvendes direkte på læber, øjne eller øjenlåg. Apparatet og Activating Serum er kun til udvendig brug. Hvis du oplever eventuel hævelse, længerevarende rødme eller unormal irritation, skal du stoppe med at anvende apparatet og søge lægehjælp, hvis nødvendigt. Nye brugere af ageLOC Boost og personer med følsom eller allergidisponeret hud, skal altid teste produktet på et lille hudområde, før det anvendes som anvist.
-  For at reducere risikoen for stød, forbrænding, brand eller personskade må du ikke nedsænke apparatet i vand. Må ikke placeres eller opbevares på steder, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar, bruser, håndvask eller toilet.

-  Inspicer regelmæssigt om der er skader; anvend ikke apparatet, hvis der fremgår beskadigelser, eller det er i stykker for at undgå skader.
-  ageLOC Boost indeholder et lithium-polymer-batteri, der ikke kan udskiftes. Eksponer aldrig apparatet for varme, for at forebygge risiko for eksplosion. Opbevar ikke apparatet i nærheden af en varmekilde såsom en radiator, ild eller varmeventil. Rådfør dig med flyselskabet, inden du rejser med eller sender dette apparat med fly.
-  Genopladelige batterier som dem, der bruges i ageLOC® Boost, kræver en minimal ladning for at fungere korrekt. Vi anbefaler, at man oplader apparaten, når lavt batteri indikeres for at optimere batteriets levetid, og at man undgår at opbevare apparatet ubrugt i flere måneder.
-  Bemærk, ageLOC Boost oplades med en induktiv oplader. Anvend altid den medfølgende oplader. Forsøg ikke at oplade batteriet med en anden induktiv oplader. Kontakt Nu Skin Support i tilfælde af skader.
-  Oplad ikke apparatet på badeværelset eller i nærheden af vand.
-  Anvend ikke skrappe kemikalier eller skurende midler på dit ageLOC Boost-apparat.
-  Undgå at efterlade ageLOC Boost i meget kolde eller varme omgivelser i længere tid. Opbevares indendørs.
-  Placer altid apparatet på en varmefast, stabil, flad overflade, især under opladning.
-  Anvend kun ageLOC Boost som foreskrevet og ikke på kompromitteret hud eller hævede modermærker. Anvend ikke ageLOC Boost i længere tidsintervaller eller oftere end den anviste appliceringstid. Rengør jævnligt håndtaget.

FØR DU BEGYNDER


 Læs alle sikkerhedsinstruktioner og tekniske informationer, inden du anvender ageLOC Boost.

OPLADNING AF DIT AGELOC BOOST™-APPARAT

Oplad ageLOC Boost fuldt, inden den anvendes første gang.


Sørg for at både apparatet og den magnetiske oplader er helt tørre inden opladning.

Placer apparatet på den magnetiske oplader (i den korrekte position, se diagrammet). Sørg for, at magneterne sætter sig i den rigtige position. Tilslut USB-kablet til en stikkontakt.

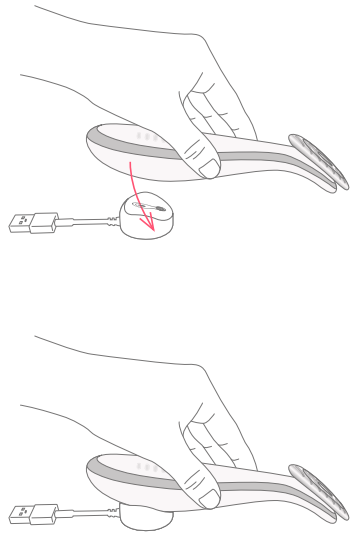

Oplad ageLOC Boost fuldt.


Når opladningen begynder, vibrerer ageLOC Boost en enkelt gang og LED-lysbjælken vil langsomt skrues op - dette indikerer, at apparatet oplades, og det aktuelle strømniveau.

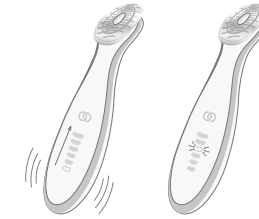

Efter to minutter vil lysbjælkerne lyse diskontinuerligt for at indikere det aktuelle batteriniveau. Når apparatet er fuldt opladet, stopper lyset med at lyse diskontinuerligt, og LED-lysbjælken vil forblive svagt oplyst.



ageLOC Boost oplades med en induktiv oplader. Anvend altid den medfølgende oplader til at oplade apparatet. Forsøg ikke at oplade batteriet med en anden induktiv oplader. Kontakt Nu Skin Support i tilfælde af skader.

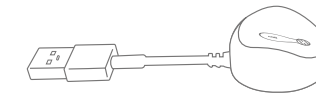

BRUGERVEJLEDNING

Anvend ageLOC Boost™ som en del af din morgenhudpleje efter rens og toning.


BEMÆRK: ageLOC Boost er særligt udviklet til brug sammen med ageLOC Boost Activating Serum. For din egen sikkerheds og komforts skyld, anbefaler vi, at man ikke anvender apparatet med andre produkter end Activating Serum.

PÅFØRINGSTID


En påføring består af to (2) et-minutters påføringer i halvdelen af ansigtet. Efter et minut standser ageLOC Boost kortvarigt, så du kan påføre yderligere ageLOC Boost Activating Serum på den ledende overflade, inden du begynder at tage dig af anden halvdel af ansigtet.




TRIN 1 Tænd apparatet ved at swipe opad fra bund til top på touch-overfladen. Lyset tændes.

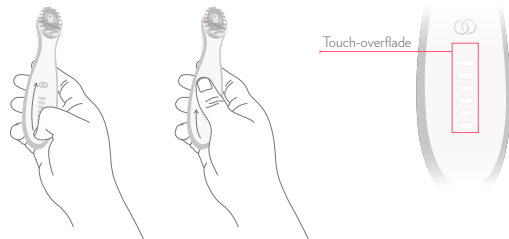


TRIN 2 Pump tre pumpeslag ageLOC Boost Activating Serum ud på apparatets ledende overflade. Fordel Activating Serum jævnt på halvdelen af dit ansigt, ved hjælp af apparatet.

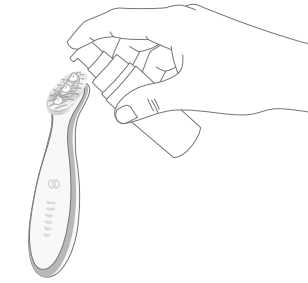

TRIN 3 Start påføring ved at swipe opad fra bund til top på touch-overfladen. Apparatet vibrerer let for at indikere, at påføringen er i gang. Placer den ledende overflade på ansigtet og start påføringen på huden ved at anvende langsomme bevægelser i opad- og udadgående bevægelser i et minut.

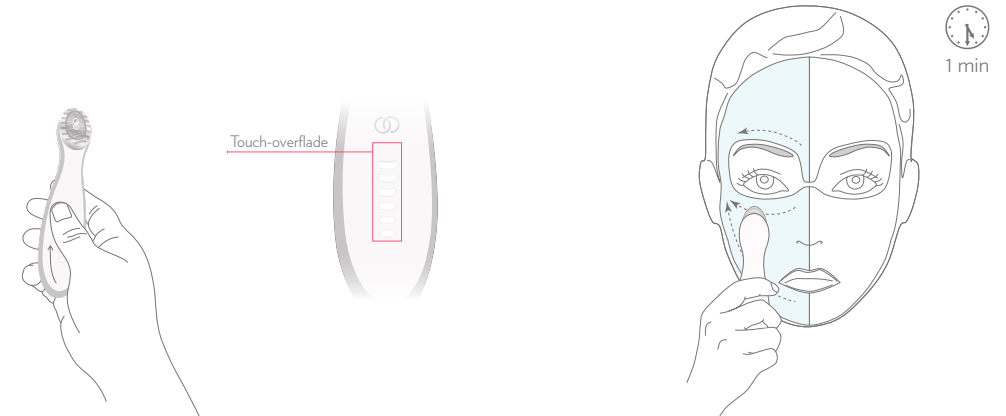


TRIN 4 Når første påføring er gennemført, standser apparatet automatisk. Fordel yderligere tre pumpeslag på apparatets ledende overflade og fordel jævnt udover den anden halvdel af ansigtet. Swipe nedad fra top til bund på touch-overfladen. Apparatet starter igen og vil vibrere let. Fortsæt med langsomme, opad- og udadgående bevægelser det resterende minut.

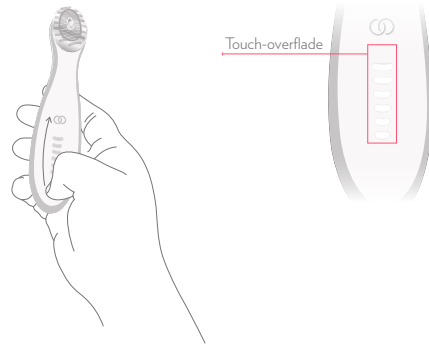

TRIN 5 Apparatet slukker automatisk, når hele påføringscyklussen er gennemført. Når påføringen er udført, masseres eventuelt overskydende serum ind i huden. Udfør derefter din daglige hudplejerutine.

FOR AT SÆTTE PÅFØRINGEN PÅ PAUSE Swipe ned fra top til bund på touch-overfladen, når som helst. Swipe opad igen fra bund til top på touch-overfladen for at fortsætte.

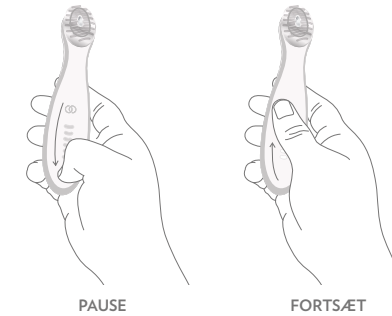


FOR AT STOPPE PÅFØRINGEN MANUELT Du kan når som helst under anvendelse stoppe apparatet ved at swipe nedad fra top til bund på touch-overfladen to gange.



BEMÆRK: ageLOC Boost er udviklet til at glide langsomt over hudens overflade under anvendelsen og skal ikke holdes stille på samme sted. Hvis du oplever længerevarende rødme eller unormal irritation, skal du stoppe med at anvende apparatet og søge lægehjælp, hvis nødvendigt.

RENGØRING OG PLEJE AF DIT AGELOC BOOST-APPARAT

ageLOC Boost skal rengøres som foreskrevet i vejledningen efter hver anvendelse, for at undgå, at der samler sig rester og snavs. Rens da den ledende overflade på ageLOC Boost under rindende vand efter hver anvendelse, for at sikre, at resterende materiale og produkt fjernes fra revnerne. Tør apparatet helt tørt med en vaskeklud. Opbevares et tørt sted.

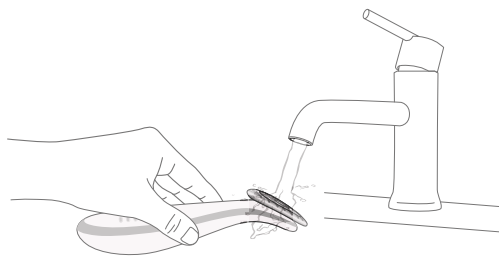

FEJLFINDING

TAB AF LEDEEVNE UNDER ANVENDELSE: Hvis mikrostrømmens ledeevne forsvinder midlertidigt, vil apparatets LED-lysbjælke blinke i vedvarende sæt af fem korte blink, forbundet med fem kraftige vibrationer. Hvis dette sker, påfør mere ageLOC Boost Activating Serum på apparatets ledende overflade. Swipe opad langs touch-overfladen for at genoptage påføringen.

APPARATET REAGERER IKKE: Swipe langsomt opad fra bund til top på apparatets touch-overflade. Hvis apparatet stadig ikke reagerer, oplad det fuldt, og prøv igen. Kontakt Nu Skin Support, hvis apparatet stadig ikke reagerer.

LAVT BATTERI: Lyset i bunden af apparatet vil blive gult. Oplad apparatet.

EKSTREMT LAVT BATTERI: Det gule lys i bunden af ageLOC Boost vil blinke gentagne gange, hvis brugeren forsøger at udføre en påføring. Dette indikerer, at der ikke er nok batteri tilbage til at udføre en påføring, og apparatet vil slukke. Oplad apparatet.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

Du skal bortskaffe ageLOC Boost korrekt i henhold til lokal lovgivning og gældende regler. ageLOC Boost indeholder elektroniske komponenter og et lithium-polymer-batteri, der kræver, at man bortskaffer apparatet adskilt fra andet husholdningsaffald. Kontakt din lokale affaldshåndtering, når ageLOC Boost er udtjent og hør mere om korrekt bortskaffelse og genbrugsmuligheder.



Bortskaf batterierne korrekt i dit område

VEDLIGEHOELDELSE

Forsøg ikke at reparere apparatet selv. Dette annullerer enhver garanti. Der er ingen dele, som kan repareres af brugeren.

Send ikke beskadigede apparater med fly.

TEKNISK INFORMATION

ageLOC Boost™

Maksimal ydelse:


5 V, 250 μ A, 0.414 Hz

 IP25

 Oplad kun med ageLOC Boost Magnetic Charger.

Kontakt Nu Skin Support i tilfælde af skader.

ageLOC Boost Magnetic Charger

Indgang: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromagnetisk kompatibilitet: Overholder kravene i EMC-direktiv 2014/30/EU

Sikkerhed: Overholder kravene i Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU

Vægt af apparat og batteripakke: 69,5 g






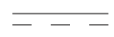
ERSTATNINGS- OG GARANTIINFORMATION

BEGRÆNSET TOÅRIG GARANTI: Nu Skin® garanterer at apparatet er fri for fejl og mangler i materialer og udførelse i en periode på to år fra leveringsdatoen. Denne garanti dækker ikke beskadigelse af produktet, som skyldes forkert brug eller uheld. Hvis produktet går i stykker inden for den toårige garantiperiode, kan du kontakte dit lokale Nu Skin-kontor og få repareret eller ombyttet produktet. Du skal kunne fremvise en kvittering, der viser leveringsdatoen. Nu Skin® forbeholder sig retten til at undersøge apparatet. Garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder i landet, hvor købet er foretaget. Sådanne rettigheder vil være beskyttede. Denne garanti er gældende i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Sydafrika, Ukraine og Storbritannien.

PATENTER

Adskillige anmeldte patenter i USA og internationalt.

SYMBOLDEFINITIONER

Symbol	Definition
	Advarsel
	Konsulter Brugermanualen
	Bortskaf batterierne korrekt i dit område
	Klasse III-apparater forsynet fra en adskilt ekstralavspændingsstrømforsyning (SELV)
	Oplad kun med angivet oplader
	Direkte strøm



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgien

Importeret af /Импортер/Импортер:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ню Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, Sydafrika.

Produceret i Kina

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021