

NU SKIN APPARATEN

***EEN MOOIE HUID GEEFT JE HET
GEVOEL DAT JE ALLES AANKUNT.***

*MET NU SKIN'S HUIDVERZORGINGSAPPARATEN VOOR THUISGEBRUIK KUN
JE JE EIGEN ROUTINE SAMENSTELLEN OM DIT GEVOEL OOK TE ERVAREN.*



ageLOC LumiSpa iO & Activating Cleanser

Grondige reiniging, exfoliatie
en huidvernieuwing

Als eerste stap van je dagelijkse routine, in de
ochtend en avond twee minuten per keer.

De ultieme optimalisatie van je huidverzorging.
Zichtbaar schonere, zachtere, gladdere, stralende
en gezond ogende huid dankzij routines op maat,
intelligente begeleiding en IoT-connectiviteit
voor nog betere resultaten.

Technologie met dubbele werking,
smart IoT-technologie



ageLOC Boost & Activating Serum

Verhelderend effect, gloed

Na het reinigen en tonifiëren,
eenmaal per dag gedurende twee minuten.

Geeft de natuurlijke schoonheid van
je huid een boost voor een heldere, vollere
en veerkrachtige huid. Het Activating Serum
helpt de zichtbaarheid van pigmentvlekken
te verbeteren.

Variabel pulserende microstroom-
technologie



ageLOC Galvanic Spa & Facial Gels

Anti-ageing huidverzorging

Na het reinigen,
2-3 keer per week

Heeft een verstevigende en liftende
werking voor je huid, verwijdert tegelijkertijd
onzuiverheden en verzacht lijntjes en rimpels
zichtbaar.

Gelijkstroom/galvanische microstroom



ageLOC WellSpa iO-systeem

Om te revitaliseren, herstellen
en te ontspannen, zodat jij er goed
uitziet en je ook goed voelt.

Drie keer per week tot dagelijks gebruiken.

Ondersteunt een zichtbaar stevigere
en strakkere huid voor een jeugdiger
uitstraling, je algehele gevoel van
welbevinden voor een betere holistische
wellness en je lichaam vóór en na work-outs.

Gepersonaliseerde adaptieve
microstroomtechnologie,
smart IoT-technologie

**WAARVOOR
IS DIT?**

GEBRUIK

VOORDELEN

**DE
TECHNOLOGIE
HIERACHTER**

Bron: Euromonitor International Ltd; detailhandelsprijzen (Retail Value RSP); alle kanalen; 2017 tot en met 2022. Beauty-systemen zijn huidverzorgingsapparaten voor thuisgebruik die uitsluitend met de bijbehorende producten van hetzelfde merk mogen worden gebruikt of waarvoor dit wordt aangeraden. Bewering gecontroleerd met de onderzoeksmethode van Euromonitor in april-juni 2023. De verkoop van huidverzorgingsapparatuur voor thuisgebruik omvat de verkoop van elektrische gezichtsreinigers zoals gedefinieerd in de Passport-database van Euromonitor. Niet inbegrepen is apparatuur voor haarverzorging/haarverwijdering, lichaamsonttharing of mondverzorging.



ageLOC LumiSpa iO ACTIVATING CLEANSER

*INPUT SLIMME HUIDVERZORGING
OUTPUT STRLENDE, GEZOND OGENSE HUID*

WAT MAAKT DE AGELOC LUMISPA iO TOT EEN KRACHTPATSER OP HET GEBIED VAN HUIDVERZORGING?

De ageLOC LumiSpa iO is een multitaskende beauty-oplossing. Hij is gewapend met onze gepatenteerde Two-Sense Motion-technologie die bij gebruik in combinatie met de ageLOC LumiSpa Activating Cleansers je huid grondig reinigt, mild exfolieert en zeven fantastische voordelen biedt. Maar dat is nog niet alles. De ageLOC LumiSpa iO kan gekoppeld worden aan de Nu Skin Vera-app om alles uit je huidverzorgingsroutine te halen, met persoonlijke huidverzorgingsroutines, intelligente begeleiding, beloningen, selfie tijdlijn en meer!

VOORDELEN

100% VAN DE GEBRUIKERS HAD EEN ZICHTBAAR GLADDERE, ZACHTERE EN SCHONERE HUID*¹

BIJ 53% TOT 62% VAN DE GEBRUIKERS WAREN DE PORIËN MINDER ZICHTBAAR***¹


BIJ 62% HAD DE HUID EEN MOOIËRE GLOED**¹

71% ZAG EEN VERMINDERING VAN ONZUIVERHEDEN²

HELDERE HUID
FRISSE HUID

ACTIVATING CLEANSERS

De vijf ageLOC LumiSpa Activating Cleansers zijn speciaal geformuleerd (en getest) om te gebruiken met je LumiSpa iO en ontwikkeld voor verschillende huidtypes: droge, normale tot gecombineerde, vette, gevoelige en onzuivere huid. Ze zorgen voor een optimale bescherming, reiniging en geleiding met de huid, wat de effectiviteit van de gepatenteerde Two-Sense Motion-technologie optimaliseert.

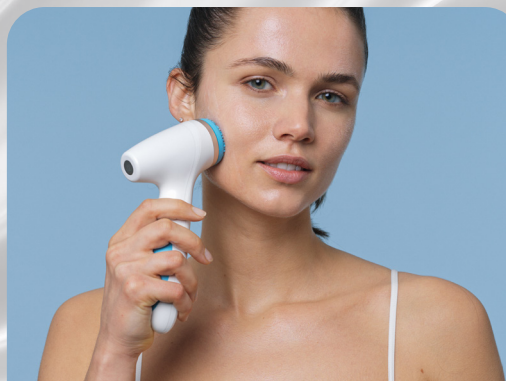

GEBRUIKSAANWIJZING

Allereerst moet je je LumiSpa iO-apparaat koppelen met de Nu Skin Vera-app op je telefoon. Als dit gelukt is kun je een vooraf ingestelde routine selecteren of je eigen creëren in de app!

STAP 1

Maak je gezicht nat met lauwwater. Doseer daarna een royale hoeveelheid (groter dan een amandel) LumiSpa Activating Cleanser op je hand. Kies een reiniger die het beste bij je huid past. Breng dit gelijkmatig aan op je gezicht. Maak het siliconen opzetstuk nat en zet je apparaat aan.

STAP 2

Reinig twee minuten lang met het LumiSpa iO-apparaat. Beweeg het apparaat met langzame, grote bewegingen over je gezicht. Zorg dat je niet gaat scrubben of te hard drukt. Als je het apparaat niet op de juiste manier gebruikt, gaat het trillen. Elke 30 seconden stopt het even. Dit is het teken dat je door moet gaan met een ander deel van je gezicht.

STAP 3

Spoel je gezicht af met water en dep zachtjes droog. Ga daarna verder met de volgende stappen van je routine. Gebruik het ageLOC LumiSpa iO-systeem voor een optimaal resultaat tweemaal per dag twee minuten lang.

STAP 4

Verwijder het siliconen opzetstuk van het apparaat. Spoel het af met water en verwijder de restanten van de reiniger. Laat het goed drogen. Spoel het apparaat af onder stromend water. Droog het apparaat af.

STAP 5



SLIMME IoT-FUNCTIES EN OOGVERZORGING

Dankzij Bluetooth kan het apparaat gekoppeld worden aan de Nu Skin Vera-app op je telefoon zodat je toegang hebt tot nog meer functies zoals intelligente begeleiding, persoonlijke huidverzorgingsroutines, selfie tijdlijnen, gemakkelijk nabestellen, gebruiksstatistieken, gepersonaliseerde productaanbevelingen, beloningen en meer!

Maak je routine compleet door de gevoelige huid onder en rondom je ogen ook de aandacht te geven die ze verdient. Gebruik ageLOC LumiSpa iO Accent en IdealEyes in combinatie met je apparaat om de zone rond je ogen te exfoliëren en te revitaliseren.

¹Klinische studies uitgevoerd op het ageLOC LumiSpa-systeem. De resultaten en de doeltreffendheid kunnen worden geëxtrapoleerd naar het ageLOC LumiSpa iO-systeem.

²***Deze resultaten zijn verkregen uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een in vivo studie van 12 weken onder 150 vrouwelijke deelnemers tussen de 35 en 65 jaar met verschillende huidtypes. Alle deelnemers kregen de opdracht om 's morgens en 's avonds, gedurende 12 weken, het LumiSpa-systeem te gebruiken dat overeenkomt met hun huidtype, in plaats van hun reguliere gezichtsreiniger. Bovenstaande resultaten hebben betrekking op:

³Het percentage deelnemers dat een zichtbare verbetering van de huid vertoonde aan het einde van het onderzoek zoals waargenomen door de klinisch beoordelaar (alle combinaties van huidtypes/LumiSpa-reinigers/siliconen opzetstukken).

⁴De waarnemingen van de klinisch beoordelaar na 12 weken. De deelnemers werd gevraagd om de ageLOC LumiSpa met het zachte opzetstuk te gebruiken met de reiniger voor de gevoelige huid, het normale opzetstuk met de reiniger voor de normale/gecombineerde huid en het harde opzetstuk met de reiniger voor de vette huid.

⁵De waarnemingen van de klinisch beoordelaar nadat de deelnemers 12 weken lang tweemaal per dag een van de volgende 3 systemen op hun gezicht hadden gebruikt: normale tot gecombineerde huid/normaal opzetstuk (verbetering van 53,6%), droge huid/normaal opzetstuk (verbetering van 62,1%), vette huid/hard opzetstuk (verbetering van 56,5%).

⁶Onderzoek uitgevoerd onder 30 deelnemers, mannen en vrouwen tussen de 18-45 jaar met een onzuivere huid, die het zachte siliconen opzetstuk en de ageLOC LumiSpa Activating Cleanser voor de Acnegevoelige huid 12 weken lang gebruikten.



ageLOC Boost ACTIVATING SERUM

*ERVAAR EEN HELDERE, VOLLERE HUID IN SLECHTS
TWE E MINUTEN PER DAG.*

VARIABEL PULSERENDE MICROSTROOM-TECHNOLOGIE

Onderbroken, variabele pulsen worden naar de huid gestuurd. Samen met het Activating Serum optimaliseert het de huid voor een jonger ogende teint.



VOORDELEN

HELPT DE ZICHTBARE TEKENEN VAN VOORTIJDIGE HUIDVEROUDERING TE VERZACHTEN.

GEEFT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN JE HUID EEN BOOST VOOR EEN HELDERE, VOLLERE EN VEERKRACHTIGE HUID.

STIMULEERT CELVERNIEUWING.

BIEDT MILDE EXFOLIATIE.

IS GEWAPEND MET DE VARIABEL PULSERENDE MICROSTROOMTECHNOLOGIE (PATENT AANGEVRAAGD), DIE DE HUID OPTIMALISEERT EN ACTIVEERT VOOR EEN JONGER OGENDE TEINT.

HET ACTIVEREND SERUM HELPT DE ZICHTBAARHEID VAN DONKERE VLEKKEN TE VERBETEREN.

ACTIVATING SERUM

Biedt optimale geleiding voor de variabel pulserende microstroom en verzorgende voordelen voor de huid dankzij de werkzame ingrediënten:

- ageLOC-MIX
- VERHELDERENDE MIX: ZEENARCIS-EXTRACT (CEA), VITAMINE C-DERIVAAT, NIACINAMIDE
- EXTRACT VAN DE KAVIAARLI MOEN
- MIX VOOR EEN VOLLERE HUID: DIVERSE VRUCHTEXTRACTEN, HYALURONZUUR



GEBRUIKSAANWIJZING

Schakel het apparaat na het reinigen en tonifiëren aan door met je vinger van onder naar boven over het touchdeel te swipen.

STAP 1

Breng drie pompjes van het ageLOC Boost Activating Serum aan op het geleidende oppervlak van het ageLOC Boost-apparaat. Verdeel dit over de ene helft van je gezicht.

STAP 2

Begin de behandeling door met je vinger van onder naar boven over het touchdeel te swipen. Beweeg het geleidende oppervlak over je gezicht in op- en buitenwaartse richting.

STAP 3

Herhaal stap 2 en stap 3 op de andere helft van je gezicht.

STAP 4

Masseer het overtollige Activating Serum in de huid en ga daarna door met je dagelijkse huidverzorgingsroutine.

STAP 5

VOOR-EN-NA-FOTO'S¹



Vóór toepassing

Na 12 weken



Vóór toepassing

Na 12 weken

Na 7 dagen zijn de eerste resultaten al zichtbaar¹ en verbeteringen waarvan je de hele dag kunt genieten⁵.

¹Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een enkelblinde in vivo studie van 12 weken onder 32 vrouwelijke deelnemers tussen de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost-systeem 12 weken lang eenmaal per dag gebruikten.

⁵Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie gebaseerd op een enkelblinde in vivo studie van 6 weken onder 20 vrouwelijke deelnemers tussen de 25 en 40 jaar die het ageLOC Boost Activating Serum in combinatie met het ageLOC Boost-apparaat 6 weken lang eenmaal per dag gebruikten.




ageLOC Galvanic Spa FACIAL GELS

*BEN JE OP ZOEK NAAR HET GEHEIM VAN EEN JONG OGENTE HUID?
ZOEK DAN NIET VERDER.*

GELIJKSTROOM/GALVANISCHE MICROSTROOM-TECHNOLOGIE

Het apparaat maakt gebruik van gelijkstromen om de belangrijkste ingrediënten optimaal af te geven aan de huid. Deze zou je kunnen vergelijken met twee magneten die elkaar aantrekken. Door verschillende instellingen te gebruiken, stoot de negatieve stroom de negatief geladen Pre-Treat Gel eerst in de opperhuid, waar deze zich bindt aan onzuiverheden. Een positieve stroom onttrekt deze onzuiverheden daarna aan de huid, en duwt tegelijkertijd de positief geladen ageLOC-ingrediënten uit de Treatment Gel in de opperhuid.

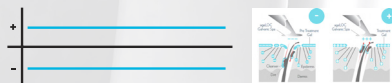

VOORDELEN

HELPT DE ZICHTBAARHEID VAN LIJNTJES EN RIMPELS TE VERMINDEREN EN ONTHULT EEN HUID DIE ER STEVIGER, MEER GELIFT EN STRAKKER UITZIET.

PAKT DE OORZAKEN VAN HUIDVEROUDERING AAN OM EEN JONG OGENDE HUID TE BEHOUDEN EN DE ZICHTBARE TEKENEN VAN VEROUDERING TE VERMINDEREN.

REVITALISEERT EN VERKWIKT DE VERMOEIDE, GESTRESTE HUID.

HELPT BIJ HET BESTRIJDEN VAN DE NEGATIEVE EFFECTEN VAN OXIDATIEVE STRESS VEROORZAAKT DOOR OMGEVINGSFACTOREN.

DE GALVANISCHE STROOM ZORGT ERVOOR DAT DE WERKZAME INGREDIËNTEN GOED DOORDRINGEN IN DE OPPERHUID.

AGELOC GALVANIC SPA FACIAL GELS

Het geheim van deze fantastische voordelen? Een combinatie van jouw apparaat en deze werkzame ingrediënten:

- GOUDSBLOEM- EN ZEEKELPEXTRACTEN (IN DE PRE-TREAT GEL).
- ageLOC-INGREDIËNTEN, ARGININE EN VERZORGENDE BESTANDDELEN, GROENE THEE-EXTRACT EN EXTRACT VAN DE JANIA RUBENS (CEA) (IN DE TREATMENT GEL).



GEBRUIKSAANWIJZING

Smeer na het reinigen de inhoud van één ampul met ageLOC Pre-Treat Gel gelijkmatig over je gezicht en hals, vermijd hierbij de ogen, oogleden en lippen.

STAP 1

Druk net zolang op de keuzeknop totdat nummer 1 op het display oplicht. Deze behandeling zal 2 minuten duren.

STAP 2

Maak je handen goed nat met NaPCA Moisture Mist of water. Houd het apparaat vast met een vochtige hand terwijl je je vingers op het chroomplaatje aan de achterkant houdt. Glijd het opzetstuk vervolgens langzaam over je huid. Vermijd hierbij de gevoelige zones, zoals onder je ogen, je oogleden en je lippen.

STAP 3

Je galvanische stroombehandeling is ten einde zodra je een lange piep hoort, gevolgd door twee korte piepjes. Het apparaat schakelt zichzelf dan automatisch uit. Verwijder de overtollige gel met een vochtige doek van je huid en het apparaat.

STAP 4

Herhaal het hele proces met een hele ampul van de ageLOC Treatment Gel en selecteer behandeling nummer 2 op je apparaat. Deze behandeling zal 3 minuten duren.

STAP 5

VOOR-EN-NA-FOTO⁶



Vóór toepassing Na één toepassing

- 1 VERMINDERT DE ZICHTBAARHEID VAN KRAAIENPOOTJES.
- 2 LIJNTJES EN RIMPELS ONDER HET OOG ZIJN ZICHTBAAR VERMINDERD.
- 3 WAL IS GELIFT, HUID IN DE OOGZONE IS VERSTEVIGD.
- 4 FIJNE LIJNTJES OP DE WANGZONE ZIJN ZICHTBAAR VERMINDERD.
- 5 LACHRIMPELS ZIJN ZICHTBAAR VERMINDERD.
- 6 KINZONE OOGT GELIFT, HUID IS VERSTEVIGD.

Na 4 weken gaven de deelnemers aan het onderzoek aan dat hun huid zo'n 48% soepeler aanvoelde.⁶

⁶Deze resultaten bleken uit een onafhankelijke professionele evaluatie in 2020 gebaseerd op een gerandomiseerde, enkelblinde in vivo studie van 4 weken onder 30 vrouwelijke deelnemers die het systeem driemaal per week gebruikten.



ageLOC WellSpa iO- SYSTEEM

*OM TE REVITALISEREN, HERSTELLEN EN TE ONTSPANNEN,
ZODAT JIJ ER GOED UITZIET EN JE OOK GOED VOELT.*



HOE WERKT HET AGELOC WELLSPA iO-SYSTEEM?

De ageLOC WellSpa iO is een exclusief beauty-, wellness- en verzorgingssysteem dat je helpt om er goed uit te zien en je goed te voelen. Van de buitengewone ageLOC-formules tot het unieke design van het apparaat, de adaptieve microstroom en de verbonden iO-beleving: het ageLOC WellSpa iO-systeem biedt revitaliserende, herstellende en ontspannende beauty- en wellnessvoordelen.



GEBRUIKSAANWIJZING

Revitalise-routine

Breng voldoende ageLOC Body Serum aan op de gewenste zones en zorg dat deze droog en schoon zijn.

Beweeg het ageLOC WellSpa iO-apparaat lichtjes over de huid omhoog naar het midden van je lichaam en weer omlaag met langzame, ronddraaiende bewegingen.

Breng zo nodig nog wat serum aan en masseer het resterende serum in de huid.

Restore-routine

Breng voldoende ageLOC Body Activating Gel aan op de gewenste zones en zorg dat de huid schoon is. Beweeg het apparaat lichtjes over je lichaam met opwaartse bewegingen.

Draai het ageLOC WellSpa iO-apparaat daarna en ga door met de volgende zone, totdat het hele lichaam is behandeld.

Masseer de resterende gel in de huid.

Restore-routine

Breng voldoende ageLOC Body Activating Gel aan op de gewenste zones en zorg dat de huid schoon is. Beweeg het ageLOC WellSpa iO-apparaat lichtjes over je lichaam met langzame opwaartse en ronddraaiende bewegingen.

Draai het ageLOC WellSpa iO-apparaat daarna en ga door met de volgende zone, totdat het hele lichaam is behandeld.

Masseer de resterende gel in de huid.

VOORDELEN

REVITALISE-ROUTINE

Ontwikkeld voor huid met zichtbare cellulitis. Het zorgt voor een zichtbaar strakkere huidcontour waardoor de huid er stralender en gladder uitziet.

Verstevigt de huid en versterkt de contouren voor een stralende, gladdere huid.

RESTORE-ROUTINE

Helpt de huid er gladder uit te laten zien dankzij de handmatige massagebeweging.

Versterkt het algehele gevoel van welzijn en zorgt ervoor dat je er beter uitziet en je meer in balans voelt.

RELAX-ROUTINE

Ondersteunt je lichaam door handmatige massage om pijnlijke spieren vóór of na de training te verkwikken of te ontspannen.

Helpt je om bij te komen na een lange dag en je verfrist te voelen.

AGELOC BODY SERUM EN AGELOC BODY ACTIVATING GEL

Het ageLOC Body Serum wordt tijdens je Revitalise-regime aangebracht en draagt bij aan een zichtbaar stevigere en strakkere huid. Het bevat ook een mix van hydraterende ingrediënten die de huid aanvullen en zo gladder maken en een jeugdiger uitstraling geven.

De ageLOC Body Activating Gel geeft de huid een verkoelende sensatie tijdens de herstellende en ontspannende routines met de ageLOC WellSpa iO. De gel draagt bij aan een beter algeheel gevoel van welbevinden en pakt de zichtbare tekenen van huidveroudering aan.



DOE ER EEN SCHEPJE BOVENOP MET HET VOLLEDIGE REVITALISE-RITUEEL

Wil je het volledige Revitalise-ritueel ervaren? Voeg dan de ageLOC Body Polish en de ageLOC Dermatic Effects toe. Nadat je je lichaam onder de douche met de ageLOC Body Polish hebt gereinigd en gedroogd, volg je de gebruikelijke stappen van je revitaliserende routine. Eindig met de ageLOC Dermatic Effects en breng deze met stevige, opwaartse ronddraaiende bewegingen aan.

SMART: IOT FUNCTIES

Begeleiden je bij elke stap met instructievideo's in real time.

Bieden een gepersonaliseerde iO-score om je gebruik te volgen en gemotiveerd te blijven om je beauty- en wellnessdoelen te bereiken.

Bieden de mogelijkheid om producten heel eenvoudig na te bestellen zodat je ze altijd op voorraad hebt.



VOOR-EN-NA-FOTO'S

UITGANGSPUNT		ageLOC WellSpa iO-SYSTEEM KLINISCHE RESULTATEN GROEP 1 REVITALISE-RITUEEL Deelnemer gebruikte: 1. ageLOC Body Polish, 3x per week 2. ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum, 3 minuten, 3x per week 3. ageLOC Dermatic Effects 2x per dag
WEEK 12		

VOOR-EN-NA-FOTO'S

UITGANGSPUNT	WEEK 12
ageLOC WellSpa iO-SYSTEEM KLINISCHE RESULTATEN GROEP 1 REVITALISE-RITUEEL Deelnemer gebruikte: 1. ageLOC Body Polish, 3x per week 2. ageLOC WellSpa iO + ageLOC Body Serum, 3 minuten, 3x per week 3. ageLOC Dermatic Effects 2x per dag	



Apparaten van Nu Skin

VERGELIJKINGSTABEL

DÉ VOORDELEN



AGELOC LUMISPA iO-SYSTEEM
(apparaat plus ageLOC LumiSpa Activating Cleansers)



AGELOC LUMISPA iO ACCENT
(apparaat plus ageLOC LumiSpa IdealEyes)



ageLOC BOOST-SYSTEEM
(apparaat met ageLOC Boost Activating Serum)



ageLOC GALVANIC FACIAL SPA-SYSTEEM
(apparaat plus ageLOC Facial Gels)

MAAKT GEBRUIK VAN ADAPTIEVE MICROSTROOMTECHNOLOGIE				
BIEDT BIJ GEBRUIK MET DE SPECIAAL ONTWIKKELDE BIJBEHORENDE PRODUCTEN EEN COMFORTABELE HANDMATIGE MASSAGE EN STIMULEERT TEVEN DE HUID				
GALVANISCHE STROMEN ZORGEN ERVOOR DAT DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN GOED DOORDRINGEN IN DE OPPERHUID				X
IN COMBINATIE MET HET SPECIAAL ONTWIKKELDE BIJBEHORENDE PRODUCTEN, OPTIMALISEREN EN ACTIVEREN DE MICROSTROMEN DE HUID			X	
PAKT DE ZICHTBARE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING AAN				X
PAKT DE VROEGTIJDIGE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING AAN			X	
VERMINDERT FIJNE LIJNTJES EN RIMPELS ZICHTBAAR				X
ZICHTBAAR STRAKKERE HUID				X
GELIFTE OOGLEDEN		X		
ZICHTBAAR STEVIGERE HUID		X (RONDOM DE OGEN)	X	X
VERBETERING IN DE ELASTICITEIT VAN DE HUID				X
APPARAAT GEKOPPELD MET DE NU SKIN VERA-APP	X	X		
PERSOONLIJKE ROUTINES	X	X		
BEGELEIDING TIJDENS GEBRUIK	X	X		
VOLLERE, VEERKRACHTIGERE HUID			X*	
STRALENDE/HELDERE HUID	X		X	
GELIJKMATIGHEID VAN DE TEINT			X	

*Dankzij het zeenarcis-extract in het Activating Serum.

**Dankzij de beweging van het apparaat over de huid wordt de huid gemasseerd.

Disclaimer:

We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet, maar houd er rekening mee dat veel van onze apparaten en cosmetische producten ook secundaire voordelen hebben.

DÉ VOORDELEN

	 AGELOC LUMISPA iO-SYSTEEM (apparaat plus ageLOC LumiSpa Activating Cleansers)	 AGELOC LUMISPA iO ACCENT (apparaat plus ageLOC LumiSpa IdealEyes)	 ageLOC BOOST-SYSTEEM (apparaat met ageLOC Boost Activating Serum)	 ageLOC GALVANIC FACIAL SPA-SYSTEEM (apparaat plus ageLOC Facial Gels)
ZACHT EXFOLIËRENDE WERKING OM DE CELVERNIEUWING TE STIMULEREN	X	X	X	
GLADDE EN ZACHT OGENDE HUID	X	X	X	
GRONDIG GEREINIGDE HUID	X			
MINDER ZICHTBARE PORIËN	X		X	
MINDER ZICHTBARE ZWELLINGEN/WALLEN EN DONKERE KRINGEN RONDOM DE OGEN		X		
HAAR ZIET ER VOLLER, DIKKER EN GEZONDER UIT				
STERKERE EN VEERKRACHTIGERE HAREN				
ONTWIKKELD VOOR HUID MET ZICHTBARE CELLULITIS				
VERSLAPTE HUID ZIET ER BETER UIT				
STRAKKERE EN MEER GECONTOURNEERDE HUID				
ALGEHEEL GEVOEL VAN WELBEVINDEN				
VERBETERING VAN DE CIRCULATIE IN DE HUIDLAGEN EN HET BINDWEEFSEL**				
HUID ZIET ER MINDER OPGEZWOLLEN UIT**				
GEEFT JE LICHAAM EEN BOOST, VOOR EN NA WORK-OUTS				
HEEFT EEN VERKWIKKENDE EN STIMULERENDE WERKING OP DE SPIEREN				
HELPT PIJNLIJKE SPIEREN TE ONTSPANNEN				
ALGEHEEL ONTSPANNING				

*Dankzij het zeenarcis-extract in het Activating Serum.

**Dankzij de beweging van het apparaat over de huid wordt de huid gemasseerd.

Disclaimer:

We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet, maar houd er rekening mee dat veel van onze apparaten en cosmetische producten ook secundaire voordelen hebben.

DÉ VOORDELEN



ageLOC GALVANIC FACIAL
SPA PLUS TRU FACE LINE
CORRECTOR



ageLOC GALVANIC FACIAL
SPA PLUS ageLOC NUTRIOL
INTENSIVE SCALP & HAIR
SERUM



ageLOC GALVANIC FACIAL
SPA PLUS ageLOC BODY
SHAPING GEL



AGELOC WELLSPA
iO - REVITALISERENDE
ROUTINE (APPARAAT +
AGELOC BODY SERUM)

MAAKT GEBRUIK VAN ADAPTIEVE MICROSTROOMTECHNOLOGIE				X
BIEDT BIJ GEBRUIK MET DE SPECIAAL ONTWIKKELDE BIJBEHORENDE PRODUCTEN EEN COMFORTABELE HANDMATIGE MASSAGE EN STIMULEERT TEVEN DE HUID				X
GALVANISCHE STROMEN ZORGEN ERVOOR DAT DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN GOED DOORDRINGEN IN DE OPPERHUID	X	X	X	
IN COMBINATIE MET HET SPECIAAL ONTWIKKELDE BIJBEHORENDE PRODUCTEN, OPTIMALISEREN EN ACTIVEREN DE MICROSTROMEN DE HUID				
PAKT DE ZICHTBARE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING AAN	X	X (HOOFDHUID)	X	X
PAKT DE VROEGTIJDIGE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING AAN				
VERMINDERT FIJNE LIJNTJES EN RIMPELS ZICHTBAAR	X (RONDOM OGEN/MOND, OP VOORHOOFD)			
ZICHTBAAR STRAKKERE HUID				X
GELIFTE OOGLEDEN				
ZICHTBAAR STEVIGERE HUID			X (BOVENBENEN EN BUIK EN BOVENARMEN)	X (BOVENBENEN EN BUIK EN ARMEN)
VERBETERING IN DE ELASTICITEIT VAN DE HUID				X
APPARAAT GEKOPPELD MET DE NU SKIN VERA-APP				X
PERSOONLIJKE ROUTINES				X
BEGELEIDING TIJDENS GEBRUIK				X
VOLLERE, VEERKRACHTIGERE HUID				
STRALENDE/HELDERE HUID				X

*Dankzij het zeenarcis-extract in het Activating Serum.

**Dankzij de beweging van het apparaat over de huid wordt de huid gemasseerd.

Disclaimer:

We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet, maar houd er rekening mee dat veel van onze apparaten en cosmetische producten ook secundaire voordelen hebben.

DÉ VOORDELEN



GELIJKMATIGHEID VAN DE TEINT				X
ZACHT EXFOLIËRENDE WERKING OM DE CELVERNIEUWING TE STIMULEREN				
GLADDE EN ZACHT OGEND E HUID	X			X
GRONDIG GEREINIGDE HUID				
MINDER ZICHTBARE PORIËN				
MINDER ZICHTBARE ZWELLINGEN/WALLEN EN DONKERE KRINGEN RONDOM DE OGEN				
HAAR ZIET ER VOLLER, DIKKER EN GEZONDER UIT		X		
STERKERE EN VEERKRACHTIGERE HAREN		X		
ONTWIKKELD VOOR HUID MET ZICHTBARE CELLULITIS			X	X
VERSLAPTE HUID ZIET ER BETER UIT				X
STRAKKERE EN MEER GECONTOURNEERDE HUID				X
ALGEHEEL GEVOEL VAN WELBEVINDEN				
VERBETERING VAN DE CIRCULATIE IN DE HUIDLAGEN EN HET BINDWEEFSEL**				
HUID ZIET ER MINDER OPGEZWOLLEN UIT**				
GEEFT JE LICHAAM EEN BOOST, VOOR EN NA WORK-OUTS				
HEEFT EEN VERKWIKKENDE EN STIMULERENDE WERKING OP DE SPIEREN				
HELPT PIJNLIJKE SPIEREN TE ONTSPANNEN				
ALGEHELE ONTSPANNING				

*Dankzij het zeenarcis-extract in het Activating Serum.

**Dankzij de beweging van het apparaat over de huid wordt de huid gemasseerd.

Disclaimer:

We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet, maar houd er rekening mee dat veel van onze apparaten en cosmetische producten ook secundaire voordelen hebben.

DÉ VOORDELEN



AGELOC WELLSPA iO -
RESTORE-ROUTINE
(APPARAAT + AGELOC BODY
ACTIVATING GEL)



AGELOC WELLSPA iO -
RELAX-ROUTINE
(APPARAAT + AGELOC BODY
ACTIVATING GEL)

MAAKT GEBRUIK VAN ADAPTIEVE MICROSTROOMTECHNOLOGIE	X	X
BIEDT BIJ GEBRUIK MET DE SPECIAAL ONTWIKKELDE BIJBEHORENDE PRODUCTEN EEN COMFORTABELE HANDMATIGE MASSAGE EN STIMULEERT TEvens DE HUID	X	X
GALVANISCHE STROMEN ZORGEN ERVOOR DAT DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN GOED DOORDRINGEN IN DE OPPERHUID		
IN COMBINATIE MET HET SPECIAAL ONTWIKKELDE BIJBEHORENDE PRODUCTEN, OPTIMALISEREN EN ACTIVEREN DE MICROSTROMEN DE HUID		
PAKT DE ZICHTBARE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING AAN	X	X
PAKT DE VROEGTIJDIGE TEKENEN VAN HUIDVEROUDERING AAN		
VERMINDERT FIJNE LIJNTJES EN RIMPELS ZICHTBAAR		
ZICHTBAAR STRAKKERE HUID		
GELIFTE OOGLEDEN		
ZICHTBAAR STEVIGERE HUID		
VERBETERING IN DE ELASTICITEIT VAN DE HUID		
APPARAAT GEKOPPELD MET DE NU SKIN VERA-APP		
PERSOONLIJKE ROUTINES		
BEGELEIDING TIJDENS GEBRUIK		
VOLLERE, VEERKRACHTIGERE HUID		
STRELENDE/HELDERE HUID		
GELIJKMATIGHEID VAN DE TEINT		

*Dankzij het zeenarcis-extract in het Activating Serum.

**Dankzij de beweging van het apparaat over de huid wordt de huid gemasseerd.

Disclaimer:

We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet, maar houd er rekening mee dat veel van onze apparaten en cosmetische producten ook secundaire voordelen hebben.

DÉ VOORDELEN

ZACHT EXFOLIËRENDE WERKING OM DE CELVERNIEUWING
TE STIMULEREN

GLADDE EN ZACHT OGENDE HUID

GRONDIG GEREINIGDE HUID

MINDER ZICHTBARE PORIËN

MINDER ZICHTBARE ZWELLINGEN/WALLEN
EN DONKERE KRINGEN RONDOM DE OGEN

HAAR ZIET ER VOLLER, DIKKER EN GEZONDER UIT

STERKERE EN VEERKRACHTIGERE HAREN

ONTWIKKELD VOOR HUID MET ZICHTBARE CELLULITIS

VERSLAPTE HUID ZIET ER BETER UIT

STRAKKERE EN MEER GECONTOURNEERDE HUID

ALGEHEEL GEVOEL VAN WELBEVINDEN

VERBETERING VAN DE CIRCULATIE IN DE HUIDLAGEN
EN HET BINDWEEFSEL**

HUID ZIET ER MINDER OPGEZWOLLEN UIT**

GEEFT JE LICHAAM EEN BOOST, VOOR EN NA WORK-OUTS

HEEFT EEN VERKWIKKENDE EN STIMULERENDE
WERKING OP DE SPIEREN

HELPT PIJNLIJKE SPIEREN TE ONTSPANNEN

ALGEHEEL ONTSPANNING



AGELOC WELLSPA iO -
RESTORE-ROUTINE
(APPARAAT + AGELOC BODY
ACTIVATING GEL)



AGELOC WELLSPA iO -
RELAX-ROUTINE
(APPARAAT + AGELOC BODY
ACTIVATING GEL)

X

X

X

X

X

X

X

*Dankzij het zeenarcis-extract in het Activating Serum.

**Dankzij de beweging van het apparaat over de huid wordt de huid gemasseerd.

Disclaimer:

We hebben de belangrijkste voordelen op een rij gezet, maar houd er rekening mee dat veel van onze apparaten en cosmetische producten ook secundaire voordelen hebben.