

# ESTUDIO CLÍNICO PARA EVALUAR LOS BENEFICIOS EN LA PIEL AL USAR AGELOC BOOST™ CON AGELOC BOOST ACTIVATING SERUM EN MUJERES DE 25-40 AÑOS

Resumen de una evaluación por parte de un profesional independiente que se realizó de acuerdo con las Buenas Prácticas Clínicas y los Procedimientos de Operación Estándar de la Organización

©2020 NSE Products, Inc., Provo, UT

## INTRODUCCIÓN

El objetivo de este estudio fue identificar los beneficios visibles para la piel al usar un novedoso dispositivo que proporciona una microcorriente de pulso variable con un producto conductor tópico. Dado que el objetivo demográfico más difícil es el de mujeres de 25 a 40 años, quienes tienen menos problemas de la piel, el medio conductor se formuló para contener ingredientes clave para tratar la apariencia de la piel. Con base en la investigación de mercado en este grupo demográfico, las características de la piel de mayor importancia incluyen luminosidad, volumen, elasticidad y tersura.

## MÉTODOS

El área de Investigación y Desarrollo de Nu Skin asignó a un laboratorio de investigación clínica independiente para dirigir el estudio. Dicho laboratorio reclutó a 33 mujeres entre los 25 y 40 años de edad. Dichos sujetos eran saludables y tenían un tipo de piel Fitzpatrick entre IV-VI. Usaron el Sistema ageLOC Boost (el dispositivo y ageLOC Boost Activating Serum) una vez al día durante 12 semanas. Su piel fue evaluada en el punto inicial y en las semanas 1, 2, 4, 8, y 12 mediante un calificador clínico y autoevaluación. Se tomaron fotografías de los sujetos seleccionados en cada punto de referencia.

## RESULTADOS

Sólo un sujeto salió del estudio por razones personales, sin embargo 32 sujetos lo completaron. El calificador clínico pudo identificar de forma estadística mejoras significativas en las características visibles de la piel en la semana 1 en cuanto a elasticidad, volumen, luminosidad, visibilidad de poros (reducción), tersura, firmeza (general) y suavidad. Estos cambios siguieron incrementando durante las 12 semanas del estudio.

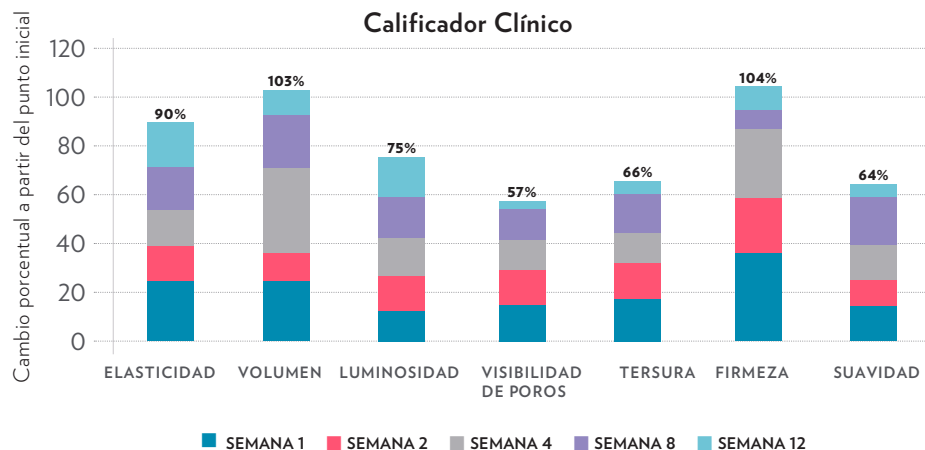


Figura 1. ageLOC Boost + Activating Serum

No sólo el calificador clínico fue capaz de ver las mejoras, sino que también los sujetos por sí mismos notaron cambios estadísticamente significativos en la apariencia de su piel en la semana 1. Informaron mejoras visibles en su piel en características como elasticidad volumen, luminosidad, visibilidad de los poros, tono uniforme, textura e hidratación. Estas mejoras siguieron incrementando durante todo el estudio.

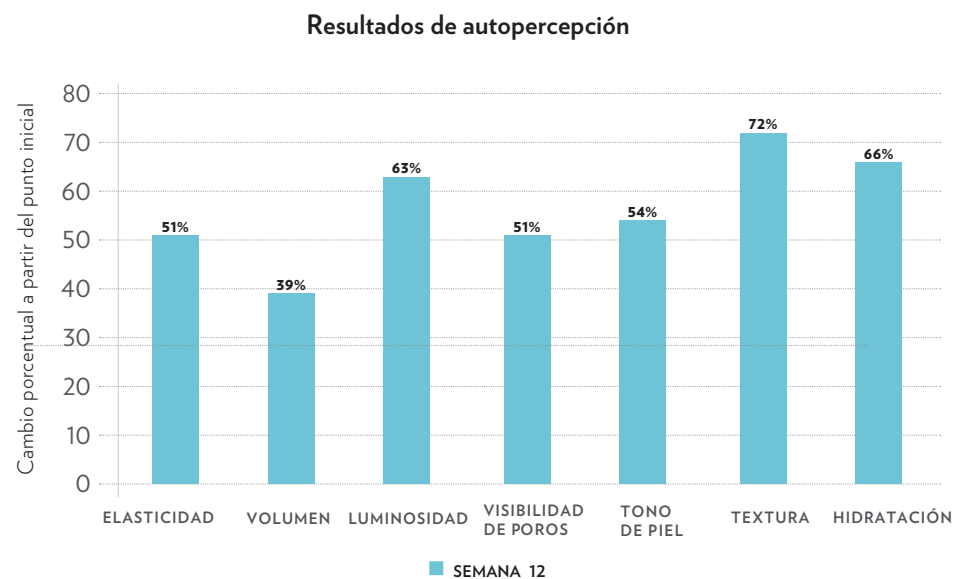


Figura 2. ageLOC Boost + Activating Serum

Además, al concluir el estudio, el siguiente porcentaje de sujetos estuvo de acuerdo con las siguientes afirmaciones después de usar ageLOC Boost™ con Activating Serum durante 12 semanas.

Declaración	Respuestas positivas
Mi piel se ve/siente más con más volumen y elástica.	85%
El sistema deja mi piel radiante e hidratada durante todo el día.	85%
Mi piel se ve/siente revitalizada y más saludable.	88%
El sistema ayuda a disminuir los signos de la edad prematuros	88%
El sistema es un impulso de belleza para mi rutina diaria.	91%

CONCLUSIÓN

Con base a los resultados de la calificación clínica y el análisis de autopercepción, ageLOC Boost, cuando se usa con Activating Serum, puede mejorar visiblemente la condición de la piel en mujeres de 25 a 40 años. Incluso teniendo en cuenta este grupo demográfico más joven y difícil que tiene menos problemas visibles en la piel, la mayoría de los sujetos estuvieron de acuerdo en que el sistema ayudó a mejorar su apariencia.

