



S3 最佳操作指引

改善 S3 掃描結果及延長 S3 使用壽命

保持一致

姿勢



檢測者應:

- 舒適地坐好
- 不要彎腰駝背
- 手臂不要過度伸展
- 掃描時保持靜止

位置



檢測者應:

- 掃描感情線與頭腦線中間的位置
- 每次掃描手掌的同一位置
- 手要覆蓋掃描儀的光源位置

壓力




檢測者應:

- 將手輕鬆地放到光源位置上
- 不要用力按壓
- 每次掃描都用同樣的力度

操作環境

掃描

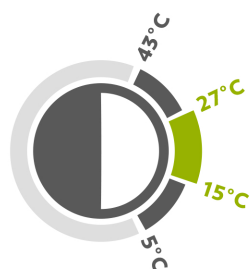


要達到最佳結果:

在室溫15°-27°C的環境進行掃描。

掃描前，先進行校正掃描（黑蓋和操作員掃描）。

移動

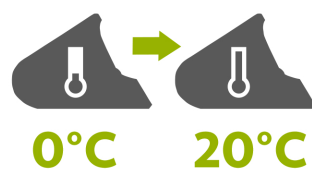

從熱或冷的環境中搬運出掃描儀時，請先等待掃描儀適應室溫再進行掃描。

儲存



儲存掃描儀時，避免極熱或極冷的環境。

儲存溫度介乎5° - 43°C。

謹慎保護

保護



好好保護掃描儀。

輕輕放下掃描儀，即使掃描儀在手提箱中，也不要投擲或拋起。

運輸



掃描儀是一個精密儀器。

運輸掃描儀時，務必盡可能地愛惜保護它。

旅行



乘飛機時，掃描儀務必作為隨身手提行李攜帶。

托運行李可能會受到粗暴對待。